



اولین تولیدکننده تخصصی محصولات
ضد عفونی کننده مراکز درمانی

General Catalogue





REZARAD PRODUCT CATALOG

Specialized Disinfection & Hygiene
Solutions for Healthcare Facilities

تاریخچه



۱۳۷۱

تأسیس شرکت رضارد و فعالیت در زمینه بازرگانی و واردات.

۱۳۷۲

شکل‌گیری واحد تحقیق و توسعه (R&D)
این شرکت با هدف شناسایی نیازهای مراکز درمانی و ارائه راهکارهای نوین.



۱۳۷۹

تأسیس کارخانه‌ای در زمینی به مساحت بیش از ۵۰۰۰ متر مربع در شهر صنعتی کاوه، ساوه، و ورود به عرصه تولید.



۱۳۷۸

ورود تخصصی به حوزه کنترل عفونت و تولید محصولات ضدعفونی‌کننده مصرفی مراکز درمانی.

امروز

امروز رضارد با توسعه مستمر سبد محصولات و بهره‌گیری از دانش روز دنیا جایگاه خود را به عنوان برندی معتبر و پیشرو در صنعت کنترل عفونت تثبیت کرده است.



ISO 9001
مدیریت کیفیت



ISO 13485
مدیریت کیفیت
تجهیزات پزشکی



ISO 45001
مدیریت ایمنی
بهداشت شغلی



ISO 14001
مدیریت
زیست محیطی



مدیریت پایش و سنجش
رضایت مشتریان
(ISO 10004)



مدیریت رضایت مشتری
ورسیدگی به شکایات
(ISO 10002)



Good Manufacturing
Practices (BSRSM)



Good Manufacturing
Practices (IFDA)

فهرست



۰۴	ضد عفونی دست و پوست	●
۲۰	پاکسازی دست و پوست	●
۲۸	مراقبت از دست و پوست	●
۳۲	ضد عفونی سطوح	●
۴۴	ضد عفونی ابزار و تجهیزات	●
۶۰	شوینده آنزیمی ابزار و تجهیزات	●
۶۶	بهداشت عمومی	●
۷۲	در یک نگاه	■



ضد عفونی دست و پوست

۰۶	درموسپت پلاس
۰۸	درموسپت
۱۰	درموسپت ژل
۱۲	درموسپت آی ان جی
۱۴	درموسپت سی اچ جی
۱۶	درموسپت پی
۱۸	درموسپت پی پلاس

مزایا

- سریع الاثر (موثر در 30 ثانیه)
- بوی مطبوع و ملایم
- حاوی مواد نرم کننده پوست
- اثر ضد میکروبی پایدار بر روی فلور نرمال پوست
- بدون اثرات خشکی پوست و درمانیت در اثر استفاده مکرر
- موثر بر طیف وسیعی از باکتری، قارچ، مخمر، ویروس و مایکوباکتریومها

کاربرد: محلول ضد عفونی کننده الکلی، جهت ضد عفونی بهداشتی دست و اسکراب جراحی

شرایط نگهداری



در دمای بین ۵+ تا ۳۵+ درجه سانتی گراد،
دور از نور خورشید و منابع حرارتی نگهداری شود.

طیف اثر



باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی، قارچها، مخمرها،
مایکوباکتریومها، ویروسهای پوشش دار و بدون پوشش.

تاییدیه ها



دارای تاییدیه و ثبت شده در اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گواهی
انستیتو پاستور ایران و تست شده مطابق استانداردهای:

• ISIRI 10504 • ISIRI 19851 • ISIRI 16676 • ISIRI 11797 • ISIRI 11793 • EN 14563



DERMOSEPT 
DISINFECTION
درموسپت پلاس



ترکیبات

- Ethanol
- Isopropyl alcohol
- Benzalkonium chloride
- Glycerin
- Auxiliary Ingredients



موارد هشدار

- محلول آتش‌زا می باشد، در ظروف در بسته نگهداری شود.
- از اسپری محلول بر روی شعله و منابع حرارتی خودداری کنید.
- در صورت بلع اتفاقی تحریک به استفراغ نگردد و فوراً به پزشک مراجعه شود.
- از استنشاق و بلعیدن محلول خودداری شود.
- در صورت تماس اتفاقی با چشم، اگر در چشمان خود لنز دارید ابتدا آن را خارج کنید و سپس با آب بهداشتی به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه شستشو داده و به پزشک مراجعه نمایید.
- فقط برای استعمال خارجی و بر روی پوست سالم مصرف شود.
- از ورود آلودگی به ظرف جلوگیری شود.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



دستور مصرف

اسکراپ بهداشتی دست‌ها:



۲ تا ۳ میلی‌لیتر از محلول را بر روی کف دست پمپ کرده و سپس هر دو دست را بر روی یکدیگر مالش دهید. به نحوی که بین انگشتان، پشت و روی دست تا مچ به محلول آغشته گردد. برای مدت ۳۰ ثانیه اجازه دهید که محلول در حین مالش از روی پوست دست خشک شود.



دستور مصرف

اسکراپ جراحی دست جراحان:

دست‌ها و ساعدها را طی سه مرحله ضدعفونی کنید. به طوری که در هر مرحله دست‌ها را با ۶ میلی‌لیتر از محلول آغشته کرده و در مجموع به مدت ۱ دقیقه مالش دهید و این سیکل را حداقل یکبار دیگر تکرار نمایید. از آبکشی دست‌ها پس از استفاده از محلول **درموسپت پلاس** خودداری کنید.

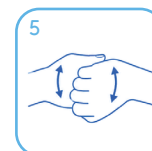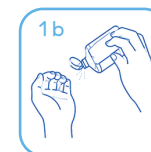

HP PHRASES:

P102/P210/P211/P403

H266/H242



تاریخ انقضا:



۳ سال پس از تولید

در صورت باز شدن درب محلول به مدت ۶ ماه.

بسته‌بندی‌ها:

۱ لیتر همراه با پمپ	۱۰۰ میلی‌لیتر همراه با اسپری
۴ لیتر	۲۵۰ میلی‌لیتر همراه با اسپری
۵ لیتر	۵۰۰ میلی‌لیتر همراه با پمپ

مزایا

- سریع الاثر (موثر در 30 ثانیه)
- بوی مطبوع و ملایم
- حاوی مواد نرم کننده پوست
- اثر ضد میکروبی پایدار بر روی فلور نرمال پوست
- بدون اثرات خشکی پوست و درمانیت در اثر استفاده مکرر
- موثر بر طیف وسیعی از باکتری، قارچ، مخمر، ویروس و مایکوباکتریومها

کاربرد: محلول ضد عفونی کننده الکلی، جهت ضد عفونی بهداشتی دست و اسکراب جراحی

شرایط نگهداری



در دمای بین +۵ تا +۳۵ درجه سانتی گراد، دور از نور خورشید و منابع حرارتی نگهداری شود.

طیف اثر



باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی، قارچها، مخمرها، مایکوباکتریومها، ویروسهای پوشش دار و بدون پوشش.

تاییدیه ها



دارای تاییدیه و ثبت شده در اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گواهی انستیتو پاستور ایران و تست شده مطابق استانداردهای:

• ISIRI 10504 • ISIRI 19851 • ISIRI 16676 • ISIRI 11797 • ISIRI 11793 • EN 14563



DERMOSEPT
DISINFECTION
درموسپت



- Ethanol
- Benzalkonium chloride
- Glycerin
- Auxiliary Ingredients



موارد هشدار

- محلول آتش‌زا می باشد، در ظروف در بسته نگهداری شود.
- از اسپری محلول بر روی شعله و منابع حرارتی خودداری کنید.
- در صورت بلع اتفاقی تحریک به استفراغ نگردد و فوراً به پزشک مراجعه شود.
- از استنشاق و بلعیدن محلول خودداری شود.
- در صورت تماس اتفاقی با چشم، اگر در چشمان خود لنز دارید ابتدا آن را خارج کنید و سپس با آب بهداشتی به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه شستشو داده و به پزشک مراجعه نمایید.
- فقط برای استعمال خارجی و بر روی پوست سالم مصرف شود.
- از ورود آلودگی به ظرف جلوگیری شود.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

HP PHRASES:

P102/P210/P211/P403

H266/H242



تاریخ انقضا:



۳ سال پس از تولید

در صورت باز شدن درب محلول به مدت ۶ ماه.



دستور مصرف

اسکراب بهداشتی دست‌ها:



۲ تا ۳ میلی‌لیتر از محلول را بر روی کف دست پمپ کرده و سپس هر دو دست را بر روی یکدیگر مالش دهید. به نحوی که بین انگشتان، پشت و روی دست تا مچ به محلول آغشته گردد. برای مدت ۳۰ ثانیه اجازه دهید که محلول در حین مالش از روی پوست دست خشک شود.



دستور مصرف

اسکراب جراحی دست جراحان:

دست‌ها و ساعدها را طی سه مرحله ضد عفونی کنید. به طوری که در هر مرحله دست‌ها را با ۶ میلی‌لیتر از محلول آغشته کرده و در مجموع به مدت ۱ دقیقه مالش دهید. و این سیکل را حداقل یکبار دیگر تکرار نمایید. از آبخشی دست‌ها پس از استفاده از محلول **درموسپت** خودداری کنید.

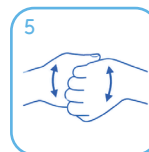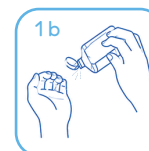

بسته‌بندی‌ها:

۱ لیتر همراه با پمپ	۱۰۰ میلی‌لیتر همراه با اسپری
۴ لیتر	۲۵۰ میلی‌لیتر همراه با اسپری
۵ لیتر	۵۰۰ میلی‌لیتر همراه با پمپ

مزایا

- سریع الاثر (موثر در 30 ثانیه)
- بوی مطبوع و ملایم
- حاوی مواد نرم کننده پوست
- اثر ضد میکروبی پایدار بر روی فلور نرمال پوست
- بدون اثرات خشکی پوست و درماتیت در اثر استفاده مکرر
- موثر بر طیف وسیعی از باکتری، قارچ، مخمر، ویروس و مایکوباکتریومها

کاربرد: ژل ضد عفونی کننده الکلی، جهت ضد عفونی بهداشتی دست

شرایط نگهداری

در دمای بین ۰+ تا ۳۵+ درجه سانتی گراد، دور از نور خورشید و منابع حرارتی نگهداری شود.

طیف اثر

باکتری های گرم مثبت و گرم منفی، قارچها، مخمرها، مایکوباکتریومها، ویروس های پوشش دار و بدون پوشش.

تاییدیه ها

دارای تاییدیه و ثبت شده در اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گواهی انستیتو پاستور ایران و تست شده مطابق استانداردهای:

• ISIRI 10504 • ISIRI 19851 • ISIRI 16676 • ISIRI 11797 • ISIRI 11793 • EN 14563



DERMOSEPT^{Gel}
DISINFECTION
درموسپت ژل



ترکیبات

- Ethanol
- Isopropanol
- Glycerin
- Emollients
- Aloe Vera Extract
- Auxiliary Ingredients



موارد هشدار

- فرآورده آتش‌زا می باشد، ژل در ظروف در بسته نگهداری شود.
- از ریزش فرآورده بر روی شعله و منابع حرارتی خودداری کنید.
- در صورت بلع اتفاقی تحریک به استفراغ نگردد و فوراً به پزشک مراجعه شود.
- از استنشاق و بلعیدن فرآورده خودداری شود.
- در صورت تماس اتفاقی با چشم، اگر در چشمان خود لنز دارید ابتدا آن را خارج کنید و سپس با آب بهداشتی به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه شستشو داده و به پزشک مراجعه نمایید.
- فقط برای استعمال خارجی و بر روی پوست سالم مصرف شود.
- از ورود آلودگی به ظرف جلوگیری شود.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

HP PHRASES:

P102/P210/P211/P403

H266/H242



تاریخ انقضا:





۳ سال پس از تولید
در صورت باز شدن درب محلول به مدت ۶ ماه.



دستور مصرف

۲ تا ۳ میلی‌لیتر از ژل درموسپت ژل را بر روی کف دست پمپ کرده و هر دو دست را بر روی یکدیگر مالش دهید. به نحوی که بین انگشتان، پشت و روی دست تا مچ به ژل آغشته گردد. برای مدت ۳۰ ثانیه اجازه دهید که ژل در حین مالش از روی پوست خشک شود.

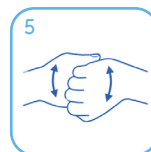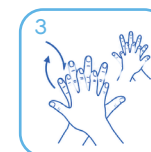

بسته‌بندی‌ها:

۴ لیتر	۱۰۰ میلی‌لیتر
	۵۰۰ میلی‌لیتر همراه با پمپ
۵ لیتر	۱ لیتر همراه با پمپ

مزایا



- سریع الاثر (موثر در 30 ثانیه)
- اثر ضد میکروبی پایدار
- استفاده آسان و مقرون به صرفه
- سازگار با پوست و فاقد اثرات آلرژیک
- موثر بر روی طیف وسیعی از باکتری، قارچ، مخمر، ویروس و مایکوباکتریومها
- مورد استفاده برای پرپ قبل از عمل جراحی‌های کوچک، لومبار پانچر و تزریق بی‌حسی اپیدورال

کاربرد: محلول الکلی ضد عفونی‌کننده محل تزریق و پوست / آماده به مصرف

شرایط نگهداری



در دمای بین ۵+ تا ۳۵+ درجه سانتی‌گراد،
دور از نور خورشید و منابع حرارتی نگهداری شود.

طیف اثر



باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی، قارچ‌ها، مخمرها،
مایکوباکتریومها، ویروس‌های پوشش‌دار و بدون پوشش.

تاییدیه‌ها



دارای تاییدیه و ثبت شده در اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گواهی
انسیتو پاستور ایران و تست شده مطابق استانداردهای:

• ISIRI 10504 • ISIRI 19851 • ISIRI 16676 • ISIRI 11797 • ISIRI 11793 • EN 14563



DERMOSEPTIN
DISINFECTION
درموسپیت آی‌ان‌جی



ترکیبات

- Ethanol
- Chlorhexidine Gluconate
- Glycerin
- Anti-Inflammatory Ingredients
- Auxiliary Ingredients Agents



موارد هشدار

- محلول آتش‌زا می‌باشد، محلول در ظروف در بسته نگهداری شود.
- از اسپری محلول بر روی شعله و منابع حرارتی خودداری کنید.
- در صورت بلع اتفاقی تحریک به استفراغ نگردد و فوراً به پزشک مراجعه شود.
- از استنشاق و بلعیدن محلول خودداری شود.
- در صورت تماس اتفاقی با چشم، اگر در چشمان خود لنز دارید ابتدا آن را خارج کنید و سپس با آب بهداشتی به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه شستشو داده و به پزشک مراجعه نمایید.
- فقط برای استعمال خارجی و بر روی پوست سالم مصرف شود.
- از ورود آلودگی به ظرف جلوگیری شود.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



دستور مصرف

محلول را روی موضع تزریق، اسپری و یا پنبه تمیز را به محلول آغشته کرده و سپس روی موضع تزریق به مدت ۳۰ ثانیه مالش دهید تا کاملاً خشک شود، سپس تزریق را انجام دهید.

Guideline



HP PHRASES:

P102/P210/P211/P403

H266/H242



تاریخ انقضا: ۳ سال پس از تولید



بسته‌بندی‌ها:

۵۰۰ میلی‌لیتر همراه با اسپری

۲۵۰ میلی‌لیتر همراه با اسپری

مزایا

- سریع الاثر (موثر در 30 ثانیه)
- بوی مطبوع و ملایم
- حاوی مواد نرم کننده پوست
- اثر ضد میکروبی پایدار بر روی فلور نرمال پوست
- بدون اثرات خشکی پوست و درماتیت در اثر استفاده مکرر
- موثر بر طیف وسیعی از باکتری، قارچ، مخمر، ویروس و مایکوباکتریومها

کاربرد: محلول ضد عفونی کننده الکلی جهت ضد عفونی بهداشتی دست و اسکراب جراحی با اثر پایداری بالا

شرایط نگهداری

در دمای بین ۵+ تا ۳۵+ درجه سانتی گراد، دور از نور خورشید و منابع حرارتی نگهداری شود.

طیف اثر

باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی، قارچها، مخمرها، مایکوباکتریومها، ویروسهای پوشش دار و بدون پوشش.

تاییدیه ها

دارای تاییدیه و ثبت شده در اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گواهی انستیتو پاستور ایران و تست شده مطابق استانداردهای:

• ISIRI 10504 • ISIRI 19851 • ISIRI 16676 • ISIRI 11797 • ISIRI 11793 • EN 14563



DERMOSEPT^{CHG}
DISINFECTION
درموسپت سی اچ جی



ترکیبات

- Ethanol
- Isopropanol
- Chlorhexidine Gluconate
- Glycerin
- Auxiliary Ingredients



موارد هشدار

- از تماس با چشم، مننژ و گوش اجتناب شود.
- فرآورده آتش‌زا می باشد، در ظروف در بسته نگهداری شود.
- از اسپری محلول، بر روی شعله و منابع حرارتی خودداری کنید.
- در صورت بلع اتفاقی تحریک به استفراغ نگردد و فوراً به پزشک مراجعه شود.
- از استنشاق و بلعیدن محلول خودداری شود.
- در صورت تماس اتفاقی با چشم، اگر در چشمان خود لنز دارید ابتدا آن را خارج کنید و سپس با آب بهداشتی به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه شستشو داده و به پزشک مراجعه نمایید.
- فقط برای استعمال خارجی و بر روی پوست سالم مصرف شود.
- از ورود آلودگی به ظرف جلوگیری شود.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

HP PHRASES:

P102/P210/P211/P403

H266/H242



تاریخ انقضا:



۲ سال پس از تولید
در صورت باز شدن درب محلول به مدت ۶ ماه.



دستور مصرف

اسکراب بهداشتی دست‌ها:




۲ تا ۳ میلی‌لیتر از محلول را بر روی کف دست پمپ کرده و سپس هر دو دست را بر روی یکدیگر مالش دهید. به نحوی که بین انگشتان، پشت و روی دست تا میچ به محلول آغشته گردد. برای مدت ۳۰ ثانیه اجازه دهید که محلول در حین مالش از روی پوست دست خشک شود.



دستور مصرف

اسکراب جراحی دست جراحان:

دست‌ها و ساعدها را طی سه مرحله ضد عفونی کنید. به‌طوریکه در هر مرحله دست‌ها را با ۶ میلی‌لیتر از محلول آغشته کرده و در مجموع به مدت ۱ دقیقه مالش دهید. و این سیکل را حداقل یکبار دیگر تکرار نمایید. از آبکشی دست‌ها پس از استفاده از محلول درموسپت سی‌اچ‌جی خودداری کنید.

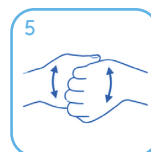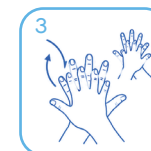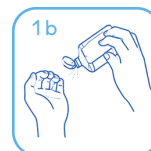

بسته‌بندی‌ها:

۱ لیتر همراه با پمپ	۱۰۰ میلی‌لیتر
	۲۵۰ میلی‌لیتر همراه با اسپری
۴ لیتر	۵۰۰ میلی‌لیتر همراه با پمپ

مزایا

- استفاده آسان
- مقرون به صرفه
- سازگار با پوست و فاقد اثرات آلرژیک
- دارای ترکیب شیمیایی توصیه شده توسط CDC

کاربرد: محلول ضد عفونی کننده محل جراحی بر پایه اتانول، ایزوپروپیل الکل و کلرهگزیدین ۲٪ مناسب برای آماده سازی و پرپ پوست محل جراحی

شرایط نگهداری

در دمای بین ۵+ تا ۳۵+ درجه سانتی گراد، دور از نور خورشید و منابع حرارتی نگهداری شود.

طیف اثر

باکتری های گرم مثبت و گرم منفی، قارچ ها، مخمرها، میکوباکتریوم ها، ویروس های پوشش دار و بدون پوشش.

تاییدیه ها

دارای تاییدیه و ثبت شده در اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گواهی انستیتو پاستور ایران و تست شده مطابق استانداردهای:

• ISIRI 10504 • ISIRI 19851 • ISIRI 16676 • ISIRI 11797 • ISIRI 11793 • EN 14563



 **DERMOSEPT** **P**
DISINFECTION
درموسپت پی



- Ethanol 20%
- Isopropyl Alcohol 50%
- Chlorhexidine Gluconate 2%
- Anti-Inflammatory Ingredients
- Auxiliary Ingredients

ترکیبات



موارد هشدار

- محلول آتش‌زا می باشد، در ظروف در بسته نگهداری شود.
- از اسپری محلول، بر روی شعله و منابع حرارتی خودداری کنید.
- در صورت بلع اتفاقی تحریک به استفراغ نگردد و فوراً به پزشک مراجعه شود.
- از استنشاق و بلعیدن فرآورده خودداری شود.
- فقط برای استعمال خارجی و بر روی پوست سالم مصرف شود.
- از تماس با قرنیه، منژ و گوش میانی جدا خودداری شود.
- برای زخم باز یا به عنوان شوینده معمولی مورد استفاده قرار نگیرد.
- در صورت تماس اتفاقی با چشم، اگر در چشمان خود لنز دارید ابتدا آن را خارج کنید و سپس با آب بهداشتی به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه شستشو داده و به پزشک مراجعه نمایید.
- برای کودکان زیر دو ماه بدلیل جذب و ایجاد حساسیت‌های پوستی استفاده نشود.
- برای بیمارانی که به کلرگزیدین یا ایزوپروپیل الکل حساسیت دارند، استفاده نشود.
- برای جراحی‌های نخاعی یا پونکسیون کمري استفاده نشود.
- قبل از استفاده از الکتروکوتر یا لوازم الکترونیکی در محل عمل، کاملاً خشک شود.
- از ریزش محلول در اطراف محوطه عمل جداً خودداری گردد.
- از ورود آلودگی به ظرف جلوگیری شود.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



دستور مصرف

ابتدا پوست را از آلودگی واضح خارجی پاک کنید. سپس سطح را با محلول درموسپت پی آغشته کنید و حداقل ۶۰ ثانیه طبق روش استاندارد مالش دهید. حداقل ۳ دقیقه زمان دهید تا کاملاً خشک شود. دقت کنید که محلول بر روی محیط اطراف ناحیه عمل ریزش نکند.

Guideline



تاریخ انقضا: ۲ سال پس از تولید و در صورت باز شدن درب محلول به مدت ۶ ماه.



بسته‌بندی:

۵۰۰ میلی‌لیتر همراه با پمپ

HP PHRASES:

P102/P210/P211/P403

H266/H242



مزایا

- استفاده آسان
- مقرون به صرفه
- سازگار با پوست و فاقد اثرات آلرژیک
- دارای ترکیب شیمیایی توصیه شده توسط CDC

کاربرد: محلول ضد عفونی کننده محل جراحی بر پایه ایزوپروپیل الکل و کلرهگزیدین ۲٪ مناسب برای آماده سازی و پرپ پوست محل جراحی

شرایط نگهداری

در دمای بین +۵ تا +۳۵ درجه سانتی گراد، دور از نور خورشید و منابع حرارتی نگهداری شود.

طیف اثر

باکتری های گرم مثبت و گرم منفی، قارچ ها، مخمرها، میکوباکتریوم ها، ویروس های پوشش دار و بدون پوشش.

تاییدیه ها

دارای تاییدیه و ثبت شده در اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گواهی انستیتو پاستور ایران و تست شده مطابق استانداردهای:

• ISIRI 10504 • ISIRI 19851 • ISIRI 16676 • ISIRI 11797 • ISIRI 11793 • EN 14563



DERMOSEPT P+
DISINFECTION
درموسپت پی پلاس

ترکیبات

- Isopropyl Alcohol 70%
- Chlorhexidine Gluconate 2%
- Anti-Inflammatory Ingredients
- Auxiliary Ingredients



موارد هشدار

- محلول آتش‌زا می باشد، در ظروف در بسته نگهداری شود.
- از اسپری محلول، بر روی شعله و منابع حرارتی خودداری کنید.
- در صورت بلع اتفاقی تحریک به استفراغ نگردد و فوراً به پزشک مراجعه شود.
- از استنشاق و بلعیدن فرآورده خودداری شود.
- فقط برای استعمال خارجی و بر روی پوست سالم مصرف شود.
- از تماس با قرنیه، منژ و گوش میانی جدا خودداری شود.
- برای زخم باز یا به عنوان شوینده معمولی مورد استفاده قرار نگیرد.
- در صورت تماس اتفاقی با چشم، اگر در چشمان خود لنز دارید ابتدا آن را خارج کنید و سپس با آب بهداشتی به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه شستشو داده و به پزشک مراجعه نمایید.
- برای کودکان زیر دو ماه به دلیل جذب و ایجاد حساسیت‌های پوستی استفاده نشود.
- برای بیمارانی که به کلرگزیدین یا ایزوپروپیل الکل حساسیت دارند، استفاده نشود.
- برای جراحی‌های نخاعی یا پونکسیون کمري استفاده نشود.
- قبل از استفاده از الکتروکوتر یا لوازم الکترونیکی در محل عمل، کاملاً خشک شود.
- از ریزش محلول در اطراف محوطه عمل جداً خودداری گردد.
- از ورود آلودگی به ظرف جلوگیری شود.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



دستور مصرف

ابتدا پوست را از آلودگی واضح خارجی پاک کنید. سپس سطح را با محلول درموسپت پی‌پلاس آغشته کنید و حداقل ۶۰ ثانیه طبق روش استاندارد مالش دهید. حداقل ۳ دقیقه زمان دهید تا کاملاً خشک شود. دقت کنید که محلول بر روی محیط اطراف ناحیه عمل ریزش نکند.

Guideline



تاریخ انقضا: ۲ سال پس از تولید و در صورت باز شدن درب محلول به مدت ۶ ماه.



بسته‌بندی:

۵۰۰ میلی‌لیتر همراه با پمپ

HP PHRASES:

P102/P210/P211/P403

H266/H242





پاکسازی دست و پوست

۲۲

درموسپت بی دبلیو

۲۴

درموسپت دبلیو

۲۶

درموکساید



مزایا



- آماده به مصرف
- مقرون به صرفه
- حاوی مواد نرم کننده پوست
- موثر در پیشگیری از زخم بستر
- مناسب برای بیماران بخش‌های ICU
- سازگار با پوست و فاقد اثرات آلرژیک
- دارای اثر ماندگاری بر روی فلور نرمال پوست
- موثر بر روی طیف وسیعی از باکتری، ویروس‌های پوشش‌دار

کاربرد: فوم آنتی سپتیک پوست و بدن برپایه کلرهگزیدین ۲٪ / بدون نیاز به آبکشی

شرایط نگهداری



در دمای بین +۵ تا +۳۵ درجه سانتی‌گراد،
دور از نور خورشید و منابع حرارتی نگهداری شود.

طیف اثر



باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی، مخمرها و
ویروس‌های پوشش‌دار.

تاییدیه‌ها



دارای تاییدیه و ثبت شده در اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تست شده مطابق استانداردهای:

- ISIRI 10504
- ISIRI 19851
- ISIRI 16676



DERMOSEPT[®] BW
DISINFECTION
درموسیت بی‌دبلیو



- Chlorhexidine Gluconate 2%
- Ehanol
- Glycerin
- Skin Conditioning Agent
- Auxiliary Ingredients

ترکیبات



موارد هشدار

- از تماس با قرنیه، منژ و گوش میانی اجتناب شود.
- در صورت بلع اتفاقی تحریک به استفراغ نگردد و فوراً به پزشک مراجعه شود.
- در صورت تماس اتفاقی با چشم، اگر در چشمان خود لنز دارید ابتدا آن را خارج کنید و سپس با آب بهداشتی به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه شستشو داده و به پزشک مراجعه نمایید.
- از ورود آلودگی به ظرف جلوگیری شود.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

HP PHRASES:

H302/P262/P281



تاریخ انقضا: ۲ سال پس از تولید



دستور مصرف

ابتدا تنظیف نرم و یا لیف بسیار نرم را با فوم آغشته کنید و سطح پوست بدن بیمار بخصوص چین‌های بدن، مناطق آلوده و کلونیزه (مانند زیر بغل و کشاله ران) را به آرامی لیف کشی و تمیز کنید. بدون نیاز به آبکشی پس از اتمام کار با حوله یا دستمال تمیز مرطوب پاکسازی شود. یک یا دو بار در هفته بدن بیماران را از گردن به پایین شستشو دهید.

توجه: در صورت استفاده برای پاکسازی زخم، بعد از آن محل زخم با نرمال سالین شسته شود.

Guideline



بسته‌بندی‌ها:

۵۰۰ میلی‌لیتر همراه با پمپ

۲۰۰ میلی‌لیتر همراه با پمپ

مزایا

- آماده مصرف
- مقرون به صرفه
- سازگار با پوست و فاقد اثرات آلرژیک
- دارای اثر ماندگاری روی فلور نرمال پوست بیش از ۳ ساعت
- موثر بر روی طیف وسیعی از باکتری، ویروس‌های پوشش‌دار

کاربرد: محلول شوینده آنتی باکتریال پوست و بدن بر پایه کلرهگزیدین ۴٪

شرایط نگهداری

در دمای بین ۵+ تا ۳۵+ درجه سانتی‌گراد، دور از نور خورشید و منابع حرارتی نگهداری شود.

طیف اثر

باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی، مخمرها و ویروس‌های پوشش‌دار.

تاییدیه‌ها

دارای تاییدیه و ثبت شده در اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تست شده مطابق استانداردهای:

- ISIRI 10504
- ISIRI 19851
- ISIRI 16676



DERMOSEPT^W
DISINFECTION
درموسپت دبلیو



ترکیبات

- Chlorhexidine Gluconate 4%
- Ethanol
- Nonionic Surfactant
- Skin Conditioning Agent
- Auxiliary Ingredients



موارد هشدار

- از تماس با چشم، مننژ و گوش میانی اجتناب شود.
- در صورت بلع اتفاقی تحریک به استفراغ نگردد و فوراً به پزشک مراجعه شود.
- در صورت تماس اتفاقی با چشم، اگر در چشمان خود لنز دارید ابتدا آن را خارج کنید و سپس با آب بهداشتی به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه شستشو داده و به پزشک مراجعه نمایید.
- از ورود آلودگی به ظرف جلوگیری شود.
- فقط برای استعمال خارجی و روی پوست سالم استفاده شود.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

HP PHRASES:
H302/P262/P281




تاریخ انقضا: ۲ سال پس از تولید



دستور مصرف

اسکراب جراحی دست جراحان:

با استفاده از روش استاندارد اسکراب شستشوی دست جراحی بر طبق WHO به مدت ۳ تا ۵ دقیقه دست ها شسته شده و با آب بهداشتی آبکشی شود.

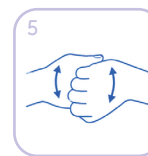

دستور مصرف

شستشوی بدن:

مقداری از محلول را (حدود ۲۵ میلی لیتر) بر روی یک لیف یا اسفنج نرم بریزید، کف مناسب ایجاد کنید و تمامی سطوح بدن را از گردن به پایین به مدت ۳ تا ۴ دقیقه به خوبی شستشو دهید سپس آبکشی نمایید. از استفاده لیف یا اسفنج زبر خودداری فرمایید.



بسته بندی ها:

۵۰۰ میلی لیتر همراه با پمپ

۱۰۰ میلی لیتر

مزایا

- بدون الکل
- فاقد عوارض محیط زیستی
- تسریع در ترمیم سوختگی
- ایمن جهت استفاده بر روی زخم
- فاقد حساسیت و ایجاد اثر خشکی بر پوست
- تایید شده توسط سازمان بهداشت جهانی به عنوان ترکیب پایه آنتی سپتیک برای زخم

کاربرد: محلول آنتی سپتیک ویژه زخم بر پایه هیدروژن پراکساید ۳٪

شرایط نگهداری



در دمای بین ۵+ تا ۳۵+ درجه سانتیگراد،
دور از نور خورشید و منابع حرارتی نگهداری شود.

طیف اثر



باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی، مایکوباکتریوم‌ها
مخمرها، ویروس‌های پوشش‌دار و بدون پوشش.

تاییدیه‌ها



دارای تاییدیه و ثبت شده در اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گواهی عدم
ایجاد حساسیت پوستی از دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تست شده مطابق استانداردهای:

- ISIRI 10504
- ISIRI 19851
- ISIRI 16676



درموکساید
DERMOXIDE



ترکیبات

- Hydrogen Peroxide 3%
- Stabilizing Agents
- Auxiliary Ingredients



موارد هشدار

- در صورت تماس اتفاقی با چشم، اگر در چشمان خود لنز دارید ابتدا آن را خارج کنید و سپس با آب بهداشتی به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه شستشو داده و به پزشک مراجعه نمایید.
- در صورت بلع اتفاقی تحریک به استفراغ نگردد و فوراً به پزشک مراجعه شود.
- از استفاده در حفرات بسته بدن خودداری شود.
- هنگام کار با محلول استفاده از لوازم حفاظت فردی الزامی است.
- هنگام باز کردن درب، از صورت دور نگاه داشته شود.
- برای زخم‌های وسیع یا سوراخ شده، گاز گرفتگی حیوانات، سوختگی وسیع و عمیق استفاده نشود.
- در صورت بانداژ از خشک شدن اطمینان حاصل کنید.
- برای بالغین و اطفال بالای ۲ سال استفاده شود و اطفال زیر ۱۲ سال با نظارت استفاده کنند.
- ظرف تکان شدید داده نشود.
- محلول را از ظرف اصلی خارج نمایید.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

HP PHRASES:

H240-H312-H315-H318

P233-P234-P235-P353-P372



دستور مصرف

محلول درموکساید را با مقدار مساوی آب مخلوط نموده و آن را برای پاکسازی زخم و پوست استفاده نمایید. برای بهداشت دهان و سفید کردن دندان ها محلول نیم غلظت را داخل دهان گردانده و سپس تخلیه نمایید و از بلع محلول خودداری کنید. برای از بین بردن قارچ پوستی دست و پا، حداقل به مدت یک هفته با محلول نیم غلظت محل را بشویید و بگذارید خشک شود. برای پیشگیری از آکنه محلول را بدون رقیق‌سازی به پنبه بهداشتی آغشته کرده محل مستعد آکنه را با آن ماساژ دهید.

Guideline



تاریخ انقضا: ۲ سال پس از تولید



بسته‌بندی‌ها:

۱ لیتر	۱۰۰ میلی‌لیتر
۴ لیتر	۲۵۰ میلی‌لیتر



مزایا

- رایحه مطبوع و ملایم
- ملایم و فاقد اثرات آلرژیک برای کودکان
- مناسب برای بیماران بستری و فاقد حرکت



موارد هشدار

- در صورت بلع اتفاقی تحریک به استفراغ نگردد و فوراً به پزشک مراجعه شود.
- در صورت تماس اتفاقی با چشم، اگر در چشمان خود لنز دارید ابتدا آن را خارج کنید و سپس با آب بهداشتی به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه شستشو داده و به پزشک مراجعه نمایید.
- در صورت بروز علائم حساسیت پوستی به پزشک مراجعه شود
- از ورود آلودگی به ظرف جلوگیری شود.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



شرایط نگهداری

در دمای بین ۵+ تا ۳۵+ درجه سانتی‌گراد، دور از نور خورشید و منابع حرارتی نگهداری شود.



AQUA SILK
آکواسیلک

کاربرد: فوم پاک کننده و تمیزکننده ملایم پوست و بدن / بدون نیاز به آبکشی



دستور مصرف

ابتدا تنظیف نرم و یا لیف بسیار نرم را با فوم آغشته نموده و سطح پوست بدن بیمار بخصوص چین‌های بدن، مناطق آلوده و کلونیزه (مانند زیر بغل و کشاله‌های ران) را به آرامی به مدت یک دقیقه لیف‌کشی و تمیز کنید، پس از اتمام کار با حوله یا دستمال تمیز مرطوب پاکسازی شود. (بدون نیاز به آبکشی)

تاریخ انقضا:

۲ سال پس از تولید

بسته‌بندی:

۲۰۰ میلی‌لیتر همراه پمپ



ترکیبات

- Lactic Acid
- Nonionic Surfactants
- Skin Conditioning Agent
- Auxiliary Ingredients

موارد هشدار



- در صورت بلع اتفاقی تحریک به استفراغ نگردد و فوراً به پزشک مراجعه شود.
- در صورت تماس اتفاقی با چشم، اگر در چشمان خود لنز دارید ابتدا آن را خارج کنید و سپس با آب بهداشتی به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه شستشو داده و به پزشک مراجعه نمایید.



تاریخ انقضا: ۳ سال پس از تولید.

مزایا



- فاقد مواد رنگی مصنوعی
- فاقد مواد آلرژی زا و محرک
- حاوی مواد نرم کننده و مرطوب کننده
- بدون ایجاد خارش و درماتیت حتی در پوست های حساس
- مناسب برای شستشوی مکرر دست ها به دلیل عدم حذف لایه چربی پوست دست.

شرایط نگهداری



در دمای بین +۵ تا +۳۵ درجه سانتی گراد، دور از نور خورشید و منابع حرارتی نگهداری شود.



AQUA SILK
Liquid

کاربرد: مایع دستشویی کرمی و رطوبت رسان ویژه پرسنل درمان

بسته بندی ها:

۴ لیتر

۵۰۰ میلی لیتر همراه پمپ

شماره پروانه بهداشتی ساخت:

سازمان غذا و دارو اراک: ۱۳/۱۰۶۹۸



دستور مصرف

دست ها را خیس کرده ۳ میلی لیتر از مایع را روی دست ریخته و به مدت ۴۰ تا ۶۰ ثانیه شستشو کرده و سپس آبکشی نمایید.



ترکیبات

- Cocamidopropyl Betaine
- Sodium Laureth Sulfate
- Glycerin
- Glyceryl Cocoate
- Cocamide DEA
- Preservative
- Fragrance
- Auxiliary Ingredients

مزایا

- حجم مصرف خیلی کم
- نرم کننده و مرطوب کننده پوست
- احیا کننده پوست های آسیب دیده

شرایط نگهداری

در دمای بین +۵ تا +۳۵ درجه سانتی گراد، دور از نور خورشید و منابع حرارتی نگهداری شود.

تاریخ انقضا: ۲ سال پس از تولید.

موارد هشدار

- فقط برای استعمال خارجی و بر روی پوست سالم مصرف شود.
- در صورت بلع اتفاقی تحریک به استفراغ نگردد و فوراً به پزشک مراجعه شود.
- در صورت تماس اتفاقی با چشم، اگر در چشمان خود لنز دارید ابتدا آن را خارج کنید و سپس با آب بهداشتی به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه شستشو داده و به پزشک مراجعه نمایید.
- از ورود آلودگی به ظرف جلوگیری شود.
- در صورت بروز علائم حساسیت پوستی به پزشک مراجعه شود.



AQUA SILK
Cream

کاربرد: کرم نرم کننده و مرطوب کننده دست ویژه پرسنل درمان

بسته بندی ها:

۱۰۰ میلی لیتر

۵۰۰ میلی لیتر همراه پمپ

شماره پروانه بهداشتی ساخت:

سازمان غذا و دارو اراک: ۱۳/۱۱۸۷۱

دستور مصرف

کرم آکواسیلک آماده به مصرف است. بهترین زمان استفاده از کرم آکواسیلک پس از شستشو با آب و صابون می باشد اما در فواصل الکل راب استفاده از آن به سلامت پوست بسیار کمک می کند. در هر بار استفاده به میزان نیم میلی لیتر کافی است. کرم را بر روی تمامی قسمت های دست توزیع کرده و تا زمانی که کاملاً جذب شود، مالش را ادامه دهید.

ترکیبات

- Propylene Glycol
- Glycerin
- Dimethicone
- Triethanolamine
- Almond Oil
- Urea
- Preservatives
- Auxiliary Ingredients

ضد عفونی سطوح

۳۴	سارفوسپت کوئیک پلاس
۳۶	سارفوسپت کوئیک
۳۸	سارفوسپت فوم
۴۰	سارفوسپت
۴۲	سارفوسپت

مزایا

- سریع الاثر
- آماده به مصرف
- فاقد خوردگی
- بوی ملایم و مطبوع
- دارای اثر ضد میکروبی پایدار
- موثر بر روی طیف وسیعی از باکتری، قارچ، مخمر، ویروس و مایکوباکتریوم‌ها

کاربرد: اسپری ضد عفونی کننده الکلی سریع الاثر سطوح، تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی / آماده به مصرف

شرایط نگهداری



در دمای بین ۰+ تا ۳۵+ درجه سانتی‌گراد،
دور از نور خورشید و منابع حرارتی نگهداری شود.

طیف اثر



باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی، قارچ‌ها، مخمرها،
مایکوباکتریوم‌ها، ویروس‌های پوشش‌دار و بدون پوشش.

تاییدیه‌ها



دارای تاییدیه و ثبت شده در اداره کل نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشکده
داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دارای تاییدیه عدم خوردگی از مرکز پژوهشی متالورژی رازی، انستیتو پاستور
ایران و تست شده مطابق استانداردهای:

• ISIRI 10504 • ISIRI 19851 • ISIRI 16676 • ISIRI 11798 • ISIRI 11344 • EN 14348



SURFOSEPT ^{QUICK+}
سرفه‌سپت کوئیک پلاس



ترکیبات

- Ethanol
- Isopropanol
- Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride (DDAC)
- Fragrance
- Auxiliary Ingredients



موارد هشدار

- محلول آتش‌زا می باشد، در ظروف در بسته نگهداری شود.
- از اسپری محلول بر روی وسایل الکتریکی و الکترونیکی خودداری شود.
- در صورت بلع اتفاقی تحریک به استفراغ نگردد و فوراً به پزشک مراجعه شود.
- محلول با سطوح پلکسی گلاس سازگاری ندارد.
- در ظروف در بسته و در شرایط استاندارد نگهداری شود.
- در صورت تماس اتفاقی با چشم، اگر در چشمان خود لنز دارید ابتدا آن را خارج کنید و سپس با آب بهداشتی به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه شستشو داده و به پزشک مراجعه نمایید.
- از ترکیب محلول با سایر مواد شیمیایی خودداری کنید.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

HP PHRASES:

P102/P210/P211/P403/H242



تاریخ انقضا: ۲ سال پس از تولید







دستور مصرف

به روش دستمال کشی:

سطح مورد نظر را از آلودگی‌های قابل رویت (خون، بزاق، ترشحات بدن و ...) پاک کرده سپس محلول سارفوسپت کوئیک پلاس را روی دستمال تمیز اسپری نموده و سطح مورد نظر را دستمال کشی کنید. بعد از ۲ دقیقه سطح مورد نظر ضد عفونی می گردد. توجه: این محصول برای سطوح حساس به الكل مانند سطوح از جنس پلکسی گلاس مناسب نمی باشد.

Applications

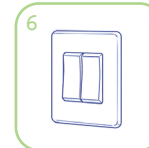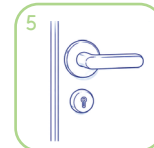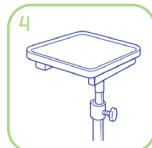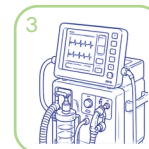

بسته بندی ها:

۷۵۰ میلی لیتر همراه اسپری	۲۵۰ میلی لیتر همراه اسپری
۴ لیتر	۵۰۰ میلی لیتر همراه اسپری

مزایا

- آماده به مصرف
- فاقد خوردگی
- سریع الاثر
- بوی ملایم و مطبوع
- دارای اثر ضد میکروبی پایدار
- موثر بر روی طیف وسیعی از باکتری، قارچ، ویروس‌ها و مایکوباکتریوم‌ها

کاربرد: اسپری ضد عفونی کننده الکلی سریع الاثر سطوح، تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی / آماده به مصرف

شرایط نگهداری

در دمای بین ۰ تا +۳۵ درجه سانتی‌گراد، دور از نور خورشید و منابع حرارتی نگهداری شود.

طیف اثر

باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی، قارچ‌ها، مخمرها، مایکوباکتریوم‌ها، ویروس‌های پوشش‌دار و بدون پوشش.

تاییدیه‌ها

دارای تاییدیه و ثبت شده در اداره کل نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دارای تاییدیه عدم خوردگی از مرکز پژوهشی متالورژی رازی، انستیتو پاستور ایران و تست شده مطابق استانداردهای:

- ISIRI 10504
- ISIRI 19851
- ISIRI 16676
- ISIRI 11798
- ISIRI 11344
- EN 14348



SURFOSEPT QUICK
سارفه‌سپت کوئیک



ترکیبات

- Ethanol
- Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride (DDAC)
- Fragrance
- Auxiliary Ingredients



موارد هشدار

- محلول آتش‌زا می باشد، در ظروف در بسته نگهداری شود.
- از اسپری محلول بر روی وسایل الکتریکی و الکترونیکی خودداری شود.
- در صورت بلع اتفاقی تحریک به استفراغ نگردد و فوراً به پزشک مراجعه شود.
- محلول با سطوح پلکسی گلاس سازگاری ندارد.
- در ظروف در بسته و در شرایط استاندارد نگهداری شود.
- در صورت تماس اتفاقی با چشم، اگر در چشمان خود لنز دارید ابتدا آن را خارج کنید و سپس با آب بهداشتی به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه شستشو داده و به پزشک مراجعه نمایید.
- از ترکیب محلول با سایر مواد شیمیایی خودداری کنید.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

HP PHRASES:

P102/P210/P211/P403/H242



تاریخ انقضا: ۲ سال پس از تولید



دستور مصرف

به روش دستمال‌کشی:

سطح مورد نظر را از آلودگی‌های قابل رویت (خون، بزاق، ترشحات بدن و...) پاک کرده سپس محلول سارفوسپت کوئیک را روی دستمال تمیز اسپری نموده و سطح مورد نظر را دستمال‌کشی کنید. بعد از ۲ دقیقه سطح مورد نظر ضدعفونی می گردد.

توجه: این محصول برای سطوح حساس به الکل مانند سطوح از جنس پلکسی گلاس مناسب نمی باشد.







دستور مصرف

به روش اسپری مستقیم:

محلول آماده به مصرف است و نیازی به رقیق‌سازی ندارد. سطح مورد نظر را از آلودگی‌های قابل رویت (خون، بزاق و ترشحات بدن و...) پاک کرده سپس محلول را روی آن اسپری نمایید و به وسیله یک دستمال تمیز سطح مورد نظر را دستمال کشی نمایید پس از ۲ دقیقه سطح مورد نظر ضدعفونی می گردد.

Applications

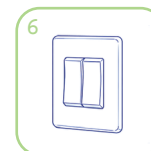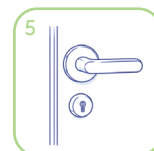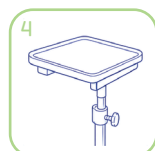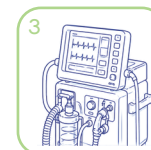

بسته‌بندی‌ها:

۷۵۰ میلی‌لیتر همراه اسپری	۲۵۰ میلی‌لیتر همراه اسپری
۴ لیتر	۵۰۰ میلی‌لیتر همراه اسپری

مزایا

- آماده مصرف
- رایحه مطبوع و ملایم
- حاوی مواد ضدخوردگی
- عدم ایجاد لکه روی سطح
- پاکسازی و ضدعفونی همزمان
- سازگار با انواع سطوح حساس به الکل
- مناسب برای تجهیزات دارای صفحه نمایش

کاربرد: اسپری فوم ضدعفونی کننده و پاک کننده سطوح و تجهیزات حساس به الکل / آماده به مصرف

شرایط نگهداری

در دمای بین ۵+ تا ۳۵+ درجه سانتی گراد، دور از نور خورشید و منابع حرارتی نگهداری شود.

طیف اثر

باکتری های گرم مثبت و گرم منفی، قارچ ها، مخمرها، ویروس های پوشش دار.

تاییدیه ها

دارای تاییدیه و ثبت شده در اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دارای تاییدیه عدم خوردگی از مرکز پژوهشی متالورژی رازی، تست شده مطابق استانداردهای:

- ISIRI 10504
- ISIRI 19851
- ISIRI 16676
- ISIRI 11798
- ISIRI 11344



سارفه سپت فوم
SURFOSEPT_{FOAM}



ترکیبات

- Quaternary Ammonium Compounds
- Nonionic Surfactants
- Auxiliary Ingredients



موارد هشدار

- در صورت بلع اتفاقی تحریک به استفراغ نگردد و فوراً به پزشک مراجعه شود.
- در صورت تماس اتفاقی با چشم، اگر در چشمان خود لنز دارید ابتدا آن را خارج کنید و سپس با آب بهداشتی به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه شستشو داده و به پزشک مراجعه نمایید.
- از ترکیب محلول با سایر مواد شیمیایی خودداری کنید.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



دستور مصرف

اسپری فوم ضد عفونی کننده را بر روی سطح مورد نظر اسپری کرده و با تمیز کردن یا دستمال تمیز سطح را دستمال کشی کنید. بعد از مدت ۲ دقیقه سطح ایمن و آماده استفاده می باشد.

Applications



HP PHRASES:

H302/H315/P262/P281



بسته بندی ها:

۴ لیتر

۷۵۰ میلی لیتر همراه اسپری

۵۰۰ میلی لیتر همراه اسپری

تاریخ انقضا: ۲ سال پس از تولید



مزایا

- شستشو و ضد عفونی همزمان
- دارای اثر ضد میکروبی پایدار
- بدون بو و بخارات آزار دهنده
- ۱۴ روز ماندگاری محلول رقیق شده
- موثر بر روی طیف وسیعی از باکتری، قارچ، مخمر، ویروس، مایکوباکتریومها
- دارای ترکیبات سختی گیر آب جهت افزایش تاثیرگذاری بیشتر ماده موثره
- مقرون به صرفه (یک لیتر محلول کنسانتره = ۱۰۰ لیتر محلول آماده مصرف)

کاربرد: محلول کنسانتره ضد عفونی کننده و شوینده سطوح محیطی / نیازمند آبکشی

شرایط نگهداری



در دمای بین ۵+ تا ۳۵+ درجه سانتیگراد،
دور از نور خورشید و منابع حرارتی نگهداری شود.

طیف اثر



باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی، قارچها، مخمرها،
مایکوباکتریومها، ویروسهای پوشش دار و بدون پوشش.

تاییدیه ها



دارای تاییدیه و ثبت شده در اداره کل نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دارای تاییدیه عدم خورندگی از مرکز پژوهشی متالورژی رازی، انستیتو پاستور ایران و تست شده مطابق استانداردهای:

- ISIRI 10504
- ISIRI 19851
- ISIRI 16676
- ISIRI 11798
- ISIRI 11344
- EN 14563



سارفه سیت I SURFOSEPT I



ترکیبات

- Benzalkonium Chloride
- Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride (DDAC)
- Amphoteric Biocide
- Nonionic Surfactant
- EDTA
- Auxiliary Ingredients




موارد هشدار

- در صورت بلع اتفاقی تحریک به استفراغ نگردد و فوراً به پزشک مراجعه شود.
- در ظروف در بسته و در شرایط استاندارد نگهداری شود.
- در صورت تماس اتفاقی با چشم، اگر در چشمان خود لنز دارید ابتدا آن را خارج کنید و سپس با آب بهداشتی به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه شستشو داده و به پزشک مراجعه نمایید.
- از ترکیب محلول با سایر مواد شیمیایی خودداری کنید.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

HP PHRASES:

H302/H315/P262/P281

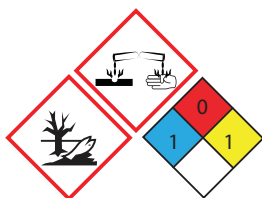

تاریخ انقضا:



در حالت غلیظ و استفاده نشده ۳ سال پس از تولید
در حالت رقیق شده ۱۴ روز



دستور مصرف

برای تهیه یک لیتر محلول آماده به مصرف، محلول کنسانتره را با غلظت ۱٪ رقیق کرده (۱۰ میلی‌لیتر از محلول را درون ۹۹۰ میلی‌لیتر آب بهداشتی حل کنید). سطح را با آن آغشته کرده و با یک وسیله مانند فرچه یا جاروی پلاستیکی آن را روی سطح بمالید تا کف ایجاد شود. ۵ تا ۱۰ دقیقه صبر کنید تا محلول اثر ضدعفونی‌کننده خود را اعمال کند، سپس محل مورد نظر را آبکشی نمایید.

Guideline



بسته‌بندی‌ها:

۴ لیتر

۱ لیتر

مزایا



- پاک‌کننده و ضد عفونی همزمان
- بدون بو و بخارات آزاردهنده
- دارای اثر ضد میکروبی پایدار
- ۱۴ روز ماندگاری محلول رقیق شده
- موثر بر روی طیف وسیعی از باکتری، قارچ، مخمر، ویروس و مایکوباکتریوم‌ها
- دارای ترکیبات سختی گیر آب جهت افزایش تاثیرگذاری بیشتر ماده موثره
- مقرون به صرفه (یک لیتر محلول کنسانتره = ۱۰۰ لیتر محلول آماده مصرف)

کاربرد: محلول کنسانتره ضد عفونی‌کننده با قابلیت تمیزکنندگی سطوح محیطی / بدون نیاز به آبکشی

شرایط نگهداری



در دمای بین ۰ تا +۳۵ درجه سانتی‌گراد،
دور از نور خورشید و منابع حرارتی نگهداری شود.

طیف اثر



باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی، قارچ‌ها، مخمرها،
مایکوباکتریوم‌ها، ویروس‌های پوشش‌دار و بدون پوشش.

تاییدیه‌ها



دارای تاییدیه و ثبت شده در اداره کل نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دارای
تاییدیه عدم خورندگی از مرکز پژوهشی متالورژی رازی، انستیتو پاستور ایران و تست شده مطابق استانداردهای:

- ISIRI 10504
- ISIRI 19851
- ISIRI 16676
- ISIRI 11798
- ISIRI 11344
- EN 14563



سرفه‌سپت II SURFOSEPT II



ترکیبات

- Benzalkonium Chloride
- Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride (DDAC)
- Amphoteric Biocide
- EDTA
- Auxiliary Ingredients




موارد هشدار

- در صورت بلع اتفاقی تحریک به استفراغ نگردد و فوراً به پزشک مراجعه شود.
- در ظروف در بسته و در شرایط استاندارد نگهداری شود.
- در صورت تماس اتفاقی با چشم، اگر در چشمان خود لنز دارید ابتدا آن را خارج کنید و سپس با آب بهداشتی به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه شستشو داده و به پزشک مراجعه نمایید.
- از ترکیب محلول با سایر مواد شیمیایی خودداری کنید.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

HP PHRASES:

H302/H315/P262/P281

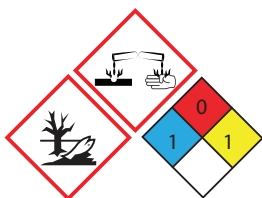

تاریخ انقضا:



در حالت غلیظ و استفاده نشده ۳ سال پس از تولید
در حالت رقیق شده ۱۴ روز



دستور مصرف

محلول را با غلظت ۱٪ رقیق کرده (۱۰ میلی‌لیتر از محلول را در ۹۹۰ میلی‌لیتر آب بهداشتی حل کنید).
کف و سطوح را با محلول، تی‌کشی نمایید. ۵ تا ۱۰ دقیقه صبر کنید تا سطح مورد نظر ضدعفونی گردد.
برای سطوح کوچک‌تر می‌توان محلول رقیق شده (۱٪) را به‌طور مستقیم روی سطح یا روی دستمال تمیز اسپری نموده سپس سطح مورد نظر را دستمال‌کشی نمایید.


Guideline



بسته‌بندی‌ها:

۴ لیتر

۱ لیتر

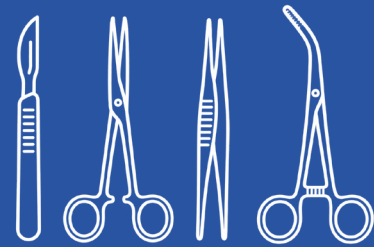

ضد عفونی ابزار و تجهیزات

۴۶	سارفوسپت اینسترومنت
۴۸	سارفوکسان
۵۰	سارفوکسان اف
۵۲	سارفوکسان ۳۰
۵۴	اکستات
۵۶	سارفوسپت اوپی ای
۵۸	سارفوسپت جی تی ای

مزایا



- عملکرد همزمان ضد عفونی‌کنندگی و پاک‌کنندگی
- قابل استفاده در دستگاه اولتراسونیک
- عمر محلول رقیق شده در حین مصرف ۱۴ روز
- فاقد بخارات آزاردهنده محرک سیستم تنفسی
- جلوگیری از خوردگی و تغییر رنگ ابزار
- مناسب برای ابزارهای پزشکی، دندانپزشکی، جراحی، بیهوشی و تجهیزات آزمایشگاهی قابل اتوکلاو

کاربرد: محلول کنسانتره ضد عفونی‌کننده و پاک‌کننده سطح متوسط
ابزارهای پزشکی، دندانپزشکی و جراحی

شرایط نگهداری



در دمای بین ۵+ تا ۳۵+ درجه سانتی‌گراد،
دور از نور خورشید و منابع حرارتی نگهداری شود.

طیف اثر



باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی، مخمرها،
مایکوباکتریوم‌ها، ویروس‌های پوشش‌دار و بدون پوشش.

تاییدیه‌ها



دارای تاییدیه و ثبت شده در اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دارای تاییدیه
عدم خوردگی از مرکز پژوهشی متالورژی رازی، انستیتو پاستور ایران و تست شده مطابق استانداردهای:

• ISIRI 10504 • ISIRI 19851 • ISIRI 16676 • ISIRI 11797 • ISIRI 11793 • EN 14348



SURFOSEPT INSTRUMENT

سرفه‌سپت اینتره‌منت



ترکیبات

- Benzalkonium Chloride
- Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride (DDAC)
- Amphoteric Biocide
- EDTA
- Auxiliary Ingredients



دستور مصرف

(این محصول به روش غوطه‌وری و همچنین در دستگاه‌های اولتراسونیک قابل استفاده است.)

پیش از مصرف، از دستکش مناسب استفاده کنید.

محلول کنسانتره سارفوسپت اینسترومنت را مطابق غلظت‌های توصیه‌شده آماده کنید.

سپس ابزارها را با توجه به غلظت و زمان تماس، داخل محلول غوطه‌ور و در صورت نیاز برس‌کشی انجام دهید.

اطمینان حاصل کنید که محلول رقیق‌شده با تمامی سطوح داخلی و خارجی ابزار در تماس باشد.

پس از پایان زمان غوطه‌وری، ابزارها را با آب بهداشتی آبکشی کنید.



غلظت و زمان تماس

رقت ۲٪ (۲۰ میلی‌لیتر محلول در ۹۸۰ میلی‌لیتر آب) ۱۵ دقیقه

رقت ۱٪ (۱۰ میلی‌لیتر محلول در ۹۹۰ میلی‌لیتر آب) ۳۰ دقیقه

رقت ۰/۵٪ (۵ میلی‌لیتر محلول در ۹۹۵ میلی‌لیتر آب) ۶۰ دقیقه

Guideline

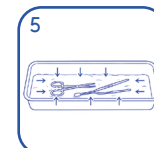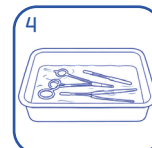

بسته‌بندی‌ها:

۴ لیتر

۱ لیتر

۲۵۰ میلی‌لیتر



موارد هشدار

• استفاده از لوازم حفاظت فردی هنگام مصرف محصول الزامی است.

• در صورت تماس با پوست، محل تماس را با آب فراوان شستشو دهید.

• در صورت تماس اتفاقی با چشم، اگر در چشمان خود لنز دارید، ابتدا لنز را

خارج کرده و سپس چشم‌ها را به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه با آب بهداشتی

به صورت مداوم شستشو دهید و به پزشک مراجعه کنید.

• در صورت بلع اتفاقی تحریک به استفراغ نگردد و فوراً به پزشک مراجعه شود.


• در ظروف در بسته و در شرایط استاندارد نگهداری شود.

• از ترکیب محلول با سایر مواد شیمیایی خودداری کنید.

• دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

HP PHRASES:

H302 /H315/P262/ P281

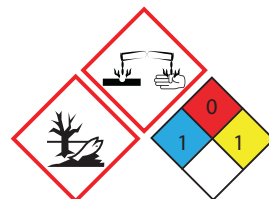

تاریخ انقضا:



در حالت غلیظ و بازنشده: ۳ سال پس از تولید

در حالت رقیق‌شده: در صورت نگهداری در ظرف دربسته و استفاده مطابق

دستورالعمل تا ۱۴ روز

مزایا

- سازگار با طبیعت
- عدم ایجاد خوردگی
- سازگاری مناسب با مواد
- عدم ایجاد لکه روی سطوح
- فاقد بو و بخارات آزار دهنده
- موثر بر روی طیف وسیعی از باکتری، قارچ، مخمر، ویروس، اسپور و مایکوباکتریومها

کاربرد: محلول ضدعفونی کننده سطح بالا آماده به مصرف
برای سطوح، ابزار و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و جراحی / بر پایه آب اکسیژنه ۶٪

شرایط نگهداری



در دمای بین +۵ تا +۳۵ درجه سانتی گراد،
دور از نور خورشید و منابع حرارتی نگهداری شود.

طیف اثر



باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی، قارچها، مخمرها،
مایکوباکتریومها، اسپورها و ویروسهای پوشش دار و بدون
پوشش.

تاییدیه ها



دارای تاییدیه و ثبت شده در اداره کل نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دارای
تاییدیه عدم خوردگی از مرکز پژوهشی متالورژی رازی، دارای تست استنشاقی از دانشکده داروسازی دانشگاه علوم
پزشکی تهران، انستیتو پاستور ایران و تست شده مطابق استانداردهای:

• ISIRI 10504 • ISIRI 19851 • ISIRI 16676 • ISIRI 11793 • ISIRI 11795 • ISIRI 11344 • EN 14348



SURFOXAN

سارفوگان



ترکیبات

- Hydrogen Peroxide 6%
- Stabilizing Agents
- Auxiliary Ingredients



موارد هشدار

- استفاده از لوازم حفاظت فردی هنگام مصرف محصول الزامی است.
- در صورت تماس با پوست، محل تماس را با آب فراوان شست و شو دهید.
- در صورت تماس اتفاقی با چشم، اگر در چشمان خود لنز دارید، ابتدا لنز را خارج کرده و سپس چشم‌ها را به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه با آب بهداشتی به صورت مداوم شست و شو دهید و به پزشک مراجعه کنید.
- در صورت بلع اتفاقی تحریک به استفراغ نگردد و فوراً به پزشک مراجعه شود.
- از برگرداندن مجدد محلول خارج شده به داخل ظرف خودداری نمایید.
- در صورت استنشاق فرآورده در شرایط غیر استاندارد برای مدتی در هوای آزاد تنفس کنید.
- از ترکیب محلول با سایر مواد شیمیایی خودداری نمایید.
- فرآورده را از بسته‌بندی اصلی خارج نکنید.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

تاریخ انقضا:





۱۸ ماه پس از تولید
در صورت باز شدن درب محلول ۱۴ روز



دستور مصرف

فرآورده آماده مصرف است. ابزارها و تجهیزات مورد نظر را پس از شست و شو با شوینده مناسب (مانند: محصول سارفوزایم/سارفوزایم فوم) به مدت ۱۵ دقیقه در محلول سارفوکسان غوطه‌ور کنید. پس از اتمام زمان غوطه‌وری با آب استریل یا آب بهداشتی آبکشی و خشک شود. در صورت عدم آبکشی ممکن است موجب سوختگی روی بافت گردد.


Guideline

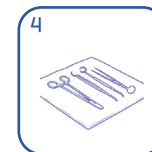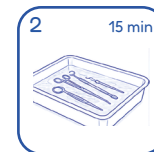

HP PHRASES:

H240-H312-H315-H318

P233-P234-P235-P353-P372

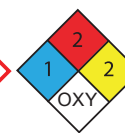

بسته‌بندی‌ها:

۵ لیتر

۱ لیتر

مزایا

- سازگار با طبیعت
- عدم ایجاد خوردگی
- سازگاری مناسب با مواد
- عدم ایجاد لکه روی سطوح
- فاقد بو و بخارات آزار دهنده
- موثر بر روی طیف وسیعی از باکتری، قارچ، مخمر، ویروس، اسپور و میکوباکتریومها

کاربرد: محلول ضدعفونی کننده سطح بالا آماده به مصرف
برای استفاده دستگاههای مهپاش، مه خشک / بر پایه آب اکسیژنه 1%

شرایط نگهداری

در دمای بین ۵+ تا ۳۵+ درجه سانتیگراد،
دور از نور خورشید و منابع حرارتی نگهداری شود.

طیف اثر

باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی، قارچها، مخمرها،
مایکوباکتریومها، اسپورها و ویروسهای پوششدار و بدون
پوشش.

تاییدیه ها

دارای تاییدیه و ثبت شده در اداره کل نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دارای
تاییدیه عدم خوردگی از مرکز پژوهشی متالورژی رازی، دارای تست استنشاقی از دانشکده داروسازی دانشگاه علوم
پزشکی تهران، انستیتو پاستور ایران و تست شده مطابق استانداردهای:

• ISIRI 10504 • ISIRI 19851 • ISIRI 16676 • ISIRI 11793 • ISIRI 11795 • ISIRI 11798 • ISIRI 11344 • EN 14348



SURFOXAN^F

ارفه‌کسان^{اف}

ترکیبات

- Hydrogen Peroxide 6%
- Stabilizing Agents
- Auxiliary Ingredients



دستور مصرف

محلول آماده مصرف سارفوکسان اف را داخل مخزن دستگاه ریخته و مطابق دستورالعمل دستگاه عمل نمایید. پس از اتمام کار دستگاه بعد از ۱۵ دقیقه محیط به طور کامل ضد عفونی می گردد. جهت ضد عفونی سطوح و تجهیزات پس از پاکسازی سطح مورد نظر ۵ الی ۱۰ دقیقه در مجاورت محلول نیم غلظت (۳٪) رقیق شده قرار گیرد.


Guideline



HP PHRASES:

H240-H312-H315-H318

P233-P234-P235-P353-P372

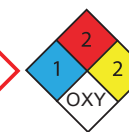

بسته بندی ها:

۵ لیتر

۱ لیتر



موارد هشدار

- استفاده از لوازم حفاظت فردی هنگام مصرف محصول الزامی است.
- در صورت تماس با پوست، محل تماس را با آب فراوان شست و شو دهید.
- در صورت تماس اتفاقی با چشم، اگر در چشمان خود لنز دارید، ابتدا لنز را خارج کرده و سپس چشمها را به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه با آب بهداشتی به صورت مداوم شست و شو دهید و به پزشک مراجعه کنید.
- در صورت بلع اتفاقی تحریک به استفراغ نگردد و فوراً به پزشک مراجعه شود.
- از برگرداندن مجدد محلول خارج شده به داخل ظرف خودداری نمایید.
- در صورت استنشاق فرآورده در شرایط غیر استاندارد برای مدتی در هوای آزاد تنفس کنید.
- از ترکیب محلول با سایر مواد شیمیایی خودداری نمایید.
- فرآورده را از بسته بندی اصلی خارج نکنید.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

تاریخ انقضا:



۱۸ ماه پس از تولید
در صورت باز شدن درب محلول ۱۴ روز

مزایا

- مقرون به صرفه
- سازگار با طبیعت
- عدم ایجاد خوردگی
- سازگاری مناسب با مواد
- عدم ایجاد لکه روی سطوح
- فاقد بو و بخارات آزار دهنده
- موثر بر روی طیف وسیعی از باکتری، قارچ، مخمر، ویروس، اسپور و میکوباکتریومها

کاربرد: محلول کنسانتره ضد عفونی کننده سطح بالا برای سطوح، ابزارهای پزشکی، جراحی، دندانپزشکی / بر پایه آب اکسیژنه ۳۰٪

شرایط نگهداری



در دمای بین +۵ تا +۳۵ درجه سانتی گراد، دور از نور خورشید و منابع حرارتی نگهداری شود.

طیف اثر



باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی، قارچها، مخمرها، میکوباکتریومها، اسپورها و ویروسهای پوشش دار و بدون پوشش.

تاییدیه ها



دارای تاییدیه و ثبت شده در اداره کل نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دارای تاییدیه عدم خوردگی از مرکز پژوهشی متالورژی رازی، دارای تست استنشاقی از دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، انستیتو پاستور ایران و تست شده مطابق استانداردهای:

• ISIRI 10504 • ISIRI 19851 • ISIRI 16676 • ISIRI 11793 • ISIRI 11795 • ISIRI 11344 • EN 14348



SURFOXAN
سارفوگان
30



ترکیبات

- Hydrogen Peroxide 30%
- Stabilizing Agents
- Auxiliary Ingredients



موارد هشدار


- محلول غلیظ سارفوکسان ۳۰ اکسید کننده قوی است.
- استفاده از لوازم حفاظت فردی هنگام مصرف محصول الزامی است.
- در صورت تماس با پوست، محل تماس را با آب فراوان شست و شو دهید.
- در صورت تماس اتفاقی با چشم، اگر در چشمان خود لنز دارید، ابتدا لنز را خارج کرده و سپس چشم‌ها را به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه با آب بهداشتی به صورت مداوم شست و شو دهید و به پزشک مراجعه کنید.
- در صورت بلع اتفاقی تحریک به استفراغ نگردد و فوراً به پزشک مراجعه شود.
- از برگرداندن مجدد محلول خارج شده به داخل ظرف خودداری نمایید.
- در صورت استنشاق فرآورده در شرایط غیر استاندارد برای مدتی در هوای آزاد تنفس کنید.
- از ترکیب محلول با سایر مواد شیمیایی خودداری نمایید.
- فرآورده را از بسته بندی اصلی خارج نکنید.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



دستور مصرف

جهت پاکسازی خون، آلودگی‌ها و رسوب پروتئینی ابزار مورد نظر را به مدت ۵ دقیقه در محلول رقیق شده سارفوکسان ۳۰ غوطه‌ور نمایید (۱ لیتر محلول کنساتره در ۴ لیتر آب بهداشتی) پس از اتمام زمان غوطه‌وری با آب بهداشتی آبکشی و خشک شود. در صورت آلودگی سخت زمان غوطه‌وری افزایش یابد. جهت ضد عفونی کننده سطوح حساس، محلول رقیق شده سارفوکسان ۳۰ (۱ لیتر از محلول در ۹ لیتر آب بهداشتی) را بر روی سطح مورد نظر به وسیله‌ی طی یا دستمال تمیز آغشته گردد.


Guideline

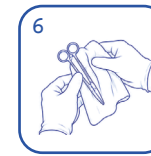

HP PHRASES:

H240-H312-H315-H318

P233-P234-P235-P353-P372

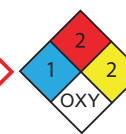

بسته بندی‌ها:

۵ لیتر

۱ لیتر

تاریخ انقضا: ۲ سال پس از تولید



مزایا



- مقرون به صرفه
- سازگار با طبیعت
- زمان اثر بخشی سریع
- سازگاری مناسب با مواد
- عدم ایجاد لکه روی سطوح

کاربرد: محلول کنسانتره ضدعفونی کننده سطح بالا، جهت ضدعفونی سطوح و ابزارهای پزشکی، جراحی، دندانپزشکی / بر پایه آب اکسیژنه ۵۰٪

شرایط نگهداری



در دمای بین ۵+ تا ۳۵+ درجه سانتی گراد، دور از نور خورشید و منابع حرارتی نگهداری شود.

طیف اثر



موثر بر طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها، باکتری های گرم مثبت و گرم منفی، مخمرها، قارچ ها، اسپورها، ویروس های پوشش دار و بدون پوشش و مایکوباکتریوم ها.

تاییدیه ها



دارای تاییدیه و ثبت شده در اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دارای تاییدیه عدم خورندگی از مرکز پژوهشی متالورژی رازی، انستیتو پاستور ایران و تست شده مطابق استانداردهای:

- ISIRI 10504 • ISIRI 19851 • ISIRI 11793 • ISIRI 11795 • ISIRI 11797 • ISIRI 11344 • EN 14348
- ISIRI 16676



OXTAT

اکستات



ترکیبات

- Hydrogen Peroxide 50%
- Silver Nitrate
- Auxiliary Ingredients



موارد هشدار




- محلول غلیظ اکستات اکسید کننده قوی است.
- استفاده از لوازم حفاظت فردی هنگام مصرف محصول الزامی است.
- در صورت تماس با پوست، محل تماس را با آب فراوان شستشو دهید.
- در صورت تماس اتفاقی با چشم، اگر در چشمان خود لنز دارید، ابتدا لنز را خارج کرده و سپس چشم‌ها را به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه با آب بهداشتی به صورت مداوم شستشو دهید و به پزشک مراجعه کنید.
- در صورت بلع اتفاقی تحریک به استفراغ نگردد و فوراً به پزشک مراجعه شود.
- از برگرداندن مجدد محلول خارج شده به داخل ظرف خودداری نمایید.
- در صورت استنشاق فرآورده در شرایط غیر استاندارد برای مدتی در هوای آزاد تنفس کنید.
- از ترکیب محلول با سایر مواد شیمیایی خودداری کنید.
- فرآورده را از بسته‌بندی اصلی خارج نکنید.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



دستور مصرف

سطح مورد نظر را از آلودگی‌های قابل رویت (خون، بزاق، ترشحات بدن و...) پاک کرده سپس محلول کنسانتره اکستات را در غلظت ۶٪ رقیق نموده (۱۲۰ میلی‌لیتر در ۸۸۰ سی‌سی آب بهداشتی) و به وسیله یک دستمال تمیز سطح مورد نظر را دستمال‌کشی نمایید پس از ۱۵ دقیقه سطح مورد نظر ضدعفونی می‌گردد. جهت استفاده محلول برای ضدعفونی‌کننده ابزار، ابزارها را به مدت ۱۵ دقیقه در محلول رقیق شده، غوطه‌ور کنید سپس با آب بهداشتی آبکشی نمایید.


Guideline

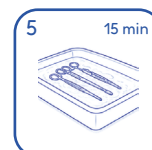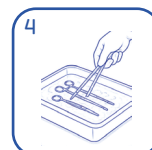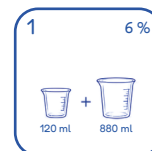

HP PHRASES:

H240-H312-H315-H318

P233-P234-P235-P353-P372

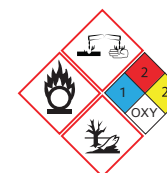

بسته‌بندی‌ها:

۵ لیتر

۱ لیتر

تاریخ انقضا: ۲ سال پس از تولید



مزایا



- مقرون به صرفه
- زمان اثر بخشی سریع
- عمر محلول در حین مصرف ۱۴ روز
- جلوگیری از خوردگی و تغییر رنگ ابزار
- سازگاری مناسب با انواع مواد و تجهیزات
- فاقد بخارات آزار دهنده و تحریک کننده مخاط تنفسی
- موثر بر روی طیف وسیعی از باکتری، قارچ، مخمر، ویروس، اسپور و میکوباکتریومها

کاربرد: محلول ضدعفونی کننده سطح بالا آماده به مصرف / بر پایه ارتوفتال آلدئید ۰/۵۵٪
جهت ضدعفونی کننده ابزار پزشکی، دندانپزشکی، جراحی و تجهیزات اسکوپ

شرایط نگهداری



در دمای بین ۰+ تا ۳۰+ درجه سانتی گراد،
دور از نور خورشید و منابع حرارتی نگهداری شود.

طیف اثر



مؤثر بر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی،
اسپورها، میکوباکتریومها، قارچها، مخمرها و
ویروس های پوشش دار و بدون پوشش.

تاییدیه ها



دارای تاییدیه و مجوز ثبت از اداره کل نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تاییدیه
عدم خوردگی از مرکز پژوهشی متالورژی رازی و تاییدیه از انستیتو پاستور ایران و تست شده مطابق استانداردهای:

- ISIRI 10504 • ISIRI 19851 • ISIRI 11793 • ISIRI 11795 • ISIRI 11797 • ISIRI 11344 • EN 14563
- ISIRI 16676



SURFOSEPT_{OPA}
سارفه سپت اوپی ای



ترکیبات




- Ortho-Phthalaldehyde 0.55%
- Corrosion Inhibitor
- Stabilizing Agents
- Auxiliary Ingredients



دستور مصرف

فرآورده آماده مصرف است. ابزارها و تجهیزات مورد نظر را پس از شستشو با شوینده آنزیمی مناسب (مانند: محصول سارفوزایم/ سارفوزایم فوم) به مدت ۵ دقیقه در محلول غوطه ور کنید. پس از اتمام زمان غوطه‌وری با آب استریل یا آب بهداشتی آبکشی و خشک شود. در صورت عدم آبکشی ممکن است موجب سوختگی روی بافت گردد.

Guideline

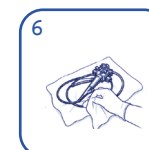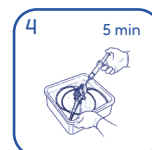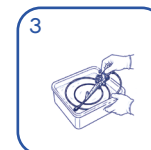

بسته‌بندی:

۵ لیتر




موارد هشدار

- استفاده از لوازم حفاظت فردی هنگام مصرف محصول الزامی است.
- در صورت تماس با پوست، محل تماس را با آب فراوان شستشو دهید.
- در صورت تماس اتفاقی با چشم، اگر در چشمان خود لنز دارید، ابتدا لنز را خارج کرده و سپس چشم‌ها را به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه با آب بهداشتی به صورت مداوم شستشو دهید و به پزشک مراجعه کنید.
- در صورت بلع اتفاقی تحریک به استفراغ نگردد و فوراً به پزشک مراجعه شود.
- از ترکیب محلول با سایر مواد شیمیایی خودداری کنید.
- برای پیشگیری از ایجاد لکه روی سطوح، قطرات پاشیده شده روی سطوح، سریعاً پاک شود.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

HP PHRASES:

H302 /H315/P262/ P281

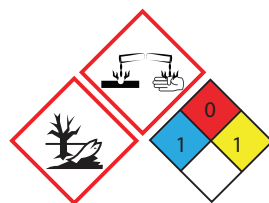

تاریخ انقضا:



۲ سال پس از تولید
عمر محلول در حین مصرف ۱۴ روز

مزایا



- مقرون به صرفه
- زمان اثر بخشی سریع
- عدم ایجاد لکه بر روی سطوح
- عمر محلول در حین مصرف ۲۸ روز
- سازگاری مناسب با انواع مواد و تجهیزات
- جلوگیری از خوردگی و تغییر رنگ ابزار
- فاقد بخارات آزاردهنده و تحریک کننده مخاط تنفسی
- موثر بر روی طیف وسیعی از باکتری، قارچ، مخمر، ویروس، اسپور و میکوباکتریومها

کاربرد: محلول ضد عفونی کننده سطح بالا آماده به مصرف / بر پایه گلوترآلدئید ۲/۵٪
جهت ضد عفونی کننده ابزار پزشکی، دندانپزشکی، جراحی و تجهیزات اسکوپ

شرایط نگهداری



در دمای بین +۵ تا +۳۵ درجه سانتی گراد،
دور از نور خورشید و منابع حرارتی نگهداری شود.

طیف اثر



مؤثر بر باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی،
اسپورها، میکوباکتریومها، قارچها، مخمرها و
ویروسهای پوشش دار و بدون پوشش.

تاییدیه ها



دارای تاییدیه و مجوز ثبت از اداره کل نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تاییدیه
عدم خوردگی از مرکز پژوهشی متالورژی رازی و تاییدیه از انستیتو پاستور ایران و تست شده مطابق استانداردهای:

- ISIRI 10504 • ISIRI 19851 • ISIRI 11793 • ISIRI 11795 • ISIRI 11797 • ISIRI 11344 • EN 14563
- ISIRI 16676



SURFOSEPT_{GTA}
سرفه سپت جی تی ای



ترکیبات

- Glutaraldehyde 2/5%
- Corrosion Inhibitors
- Stabilizing
- Auxiliary Ingredients




موارد هشدار

- استفاده از لوازم حفاظت فردی هنگام مصرف محصول الزامی است.
- در صورت تماس با پوست، محل تماس را با آب فراوان شستشو دهید.
- در صورت تماس اتفاقی با چشم، اگر در چشمان خود لنز دارید، ابتدا لنز را خارج کرده و سپس چشم‌ها را به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه با آب بهداشتی به صورت مداوم شستشو دهید و به پزشک مراجعه کنید.
- در صورت بلع اتفاقی تحریک به استفراغ نگردد و فوراً به پزشک مراجعه شود.
- از ترکیب محلول با سایر مواد شیمیایی خودداری کنید.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

HP PHRASES:

H302 /H315/P262/ P281

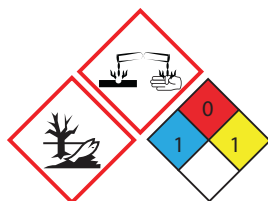

تاریخ انقضا:







۱ سال پس از تولید
عمر محلول در حین مصرف ۲۸ روز



دستور مصرف

فرآورده آماده مصرف است. ابزارها و تجهیزات مورد نظر را پس از شستشو با شوینده آنزیمی مناسب (مانند: محصول سارفوزایم/ سارفوزایم فوم) به مدت ۲۰ دقیقه در محلول غوطه ور کنید. پس از اتمام زمان غوطه‌وری با آب استریل یا آب بهداشتی آبکشی و خشک شود. در صورت عدم آبکشی ممکن است موجب سوختگی روی بافت گردد.

Guideline

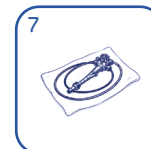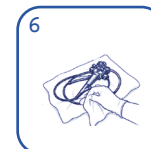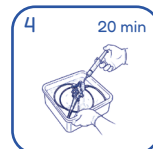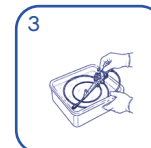

بسته‌بندی:

۵ لیتر

شوپنده آنزیمی ابزار و تجهیزات

۶۲

۶۴

سارفوزایم

سارفوزایم فوم

مزایا



- مقرون به صرفه
- بدون ایجاد کف
- مؤثر بر انواع آلودگی‌ها
- سازگار با ابزارهای حساس به حرارت
- جلوگیری از خوردگی و تغییر رنگ ابزار
- قدرت پاک‌کنندگی بالا حتی در سختی آب
- افزایش کارایی فرآیند ضدعفونی و استریلیزاسیون
- بهره‌گیری از نسل جدید آنزیم‌ها برای پاک‌کنندگی پیشرفته

کاربرد: محلول کنسانتره پاک‌کننده و شوینده آنزیماتیک جهت شستشوی ابزار جراحی، پزشکی، دندانپزشکی و دستگاه‌های اسکوپ

طیف اثر



پاک‌کننده خون و سایر آلودگی‌های فیزیکی قابل رؤیت.

شرایط نگهداری



در دمای بین +5 تا +40 درجه سانتی‌گراد دور از نور خورشید و منابع حرارتی نگهداری شود.

تاییدیه‌ها



دارای تاییدیه و مجوز ثبت از اداره کل نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای تاییدیه عدم خوردگی از مرکز پژوهشی متالورژی رازی.



SURFOZYME
سارفوزایم



ترکیبات

- Multi-Enzyme (Protease, Lipase, Amylase, Cellulase and Mannanase)
- Surfactant
- Corrosion Inhibitors
- Auxiliary Ingredients







دستور مصرف

شوینده آنزیمی سارفوزایم در دستگاه‌های اولتراسونیک، روش شستشوی دستی (غوطه‌وری) و سیستم‌های شستشوی اتوماتیک قابل استفاده است. روش شستشوی دستی (غوطه‌وری):

محلول کنسانتره سارفوزایم را با غلظت ۰/۵٪ رقیق کنید. (۵ میلی‌لیتر محلول کنسانتره در ۹۹۵ میلی‌لیتر آب بهداشتی شهری) سپس ابزارها را به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه در محلول غوطه ور نمایید. (زمان تماس بستگی به مدت زمان و میزان آلودگی دارد.) اطمینان حاصل نمایید که تمامی سطوح ابزارها به طور کامل در محلول قرار گرفته باشند. پس از پایان زمان غوطه‌وری، با استفاده از برس نرم یا مسواک مخصوص، سطح ابزارها را تمیز کنید. سپس ابزارها را به طور کامل آبکشی و خشک کنید.

Guideline

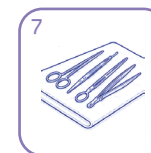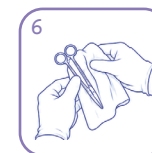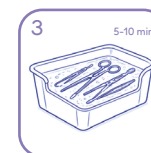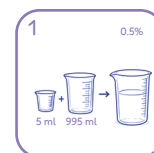

بسته‌بندی‌ها:

۴ لیتر

۱ لیتر

۲۵۰ میلی‌لیتر




موارد هشدار

- استفاده از لوازم حفاظت فردی هنگام مصرف محصول الزامی است.
- در صورت تماس با پوست، محل تماس را با آب فراوان شستشو دهید.
- در صورت تماس اتفاقی با چشم، اگر در چشمان خود لنز دارید، ابتدا لنز را خارج کرده و سپس چشم‌ها را به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه با آب بهداشتی به صورت مداوم شستشو دهید و به پزشک مراجعه کنید.
- در صورت بلع اتفاقی تحریک به استفراغ نگردد و فوراً به پزشک مراجعه شود.
- از برگرداندن مجدد محلول خارج شده به داخل ظرف خودداری نمایید.
- از ترکیب محلول با سایر مواد شیمیایی خودداری کنید.
- فرآورده را از بسته بندی اصلی خارج نکنید.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

HP PHRASES:

H302 /H315/P262/ P281

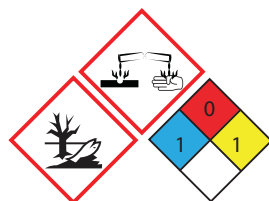

تاریخ انقضا: ۲ سال پس از تولید



مزایا



- مقرون به صرفه
- ایمن برای کاربران
- کاهش خطر انتقال عفونت
- قابلیت استفاده ایمن در اتاق عمل
- سازگار با ابزارهای حساس به حرارت
- جلوگیری از خوردگی و تغییر رنگ ابزار
- کاهش مراحل دستی و پیش تمیزکاری دشوار
- بهره‌گیری از نسل جدید آنزیم‌ها برای پاک‌کنندگی پیشرفته
- شویندگی ملایم و مؤثر برای ابزارها، تجهیزات و دستگاه‌های اسکوپ

کاربرد: اسپری فوم آماده به مصرف آنزیمی جهت پاکسازی ابزار جراحی، پزشکی، دندانپزشکی و دستگاه‌های اسکوپ

شرایط نگهداری



در دمای بین ۵+ تا ۳۵+ درجه سانتی‌گراد، دور از نور خورشید و منابع حرارتی نگهداری شود.

طیف اثر



پاک‌کننده خون و سایر آلودگی‌های فیزیکی قابل رؤیت.

تاییدیه‌ها



دارای تاییدیه و مجوز ثبت از اداره کل نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تاییدیه عدم خوردگی از مرکز پژوهشی متالورژی رازی



SURF ZYME FOAM
سارفوزایم فوم



ترکیبات

- Multi-Enzyme (Protease, Lipase, Amylase, Cellulase and Mannanase)
- Surfactant
- Corrosion Inhibitors
- Auxiliary Ingredients




موارد هشدار

- استفاده از لوازم حفاظت فردی هنگام مصرف محصول الزامی است.
- در صورت تماس با پوست، محل تماس را با آب فراوان شستشو دهید.
- در صورت تماس اتفاقی با چشم، اگر در چشمان خود لنز دارید، ابتدا لنز را خارج کرده و سپس چشم‌ها را به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه با آب بهداشتی به صورت مداوم شستشو دهید و به پزشک مراجعه کنید.
- در صورت بلع اتفاقی تحریک به استفراغ نگردد و فوراً به پزشک مراجعه شود.
- از ترکیب محلول با سایر مواد شیمیایی خودداری کنید.
- فرآورده را از بسته بندی اصلی خارج نکنید.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

HP PHRASES:

H302 /H315/P262/ P281

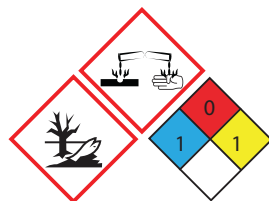

تاریخ انقضا: ۲ سال پس از تولید






دستور مصرف

بلافاصله پس از استفاده از تجهیزات، ابزارهای آلوده را در سینی یا ظرف مخصوص جمع‌آوری، قرار دهید. (اطمینان حاصل کنید که تمامی ابزارها در وضعیت باز قرار داشته باشند.) سپس اسپری فوم آنزیمی سارفوزایم فوم را از فاصله حدود ۳۰ سانتی‌متری، روی ابزارها اسپری کنید، به گونه‌ای که تمامی سطوح و نواحی آلوده با لایه‌ای یکنواخت از فوم پوشانده شوند. این فرایند مانع خشک شدن خون و سایر ترشحات بدن روی ابزار می‌شود. اجازه دهید فوم به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه روی سطح باقی بماند، سپس ابزارها را آبکشی کرده و خشک کنید. در صورت نیاز، برای حذف کامل باقی مانده آلودگی‌ها از برس نرم یا مسواک مخصوص استفاده کنید.

نکته: قبل از شستشوی وسایل و تجهیزات، باید به محض استفاده از ابزارها و تجهیزات جراحی فرآیند خیساندن شروع شود.

توصیه می‌شود این کار در اتاق عمل یا نزدیک اتاق عمل انجام شود.

Guideline

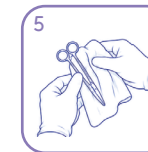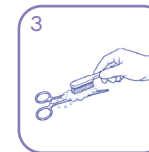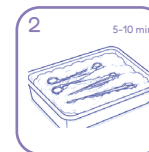

بسته‌بندی‌ها:

۴ لیتر

۷۵۰ میلی‌لیتر

بهداشت عمومی



مای لایف

مای هند

مای هند ژل

۶۷

۶۸

۷۰

مزایا

- بوی مطبوع
- مقرون به صرفه
- دارای قدرت لکه‌بری بالا
- فاقد اثر خوردگی و رنگ‌بری
- فاقد بو و بخارات آزار دهنده

طیف اثر

پاک‌کننده چربی‌ها، پروتئین‌ها و آلودگی‌های ارگانیک قابل رؤیت

شرایط نگهداری

در دمای بین +۵ تا +۳۵ درجه سانتی‌گراد، دور از نور خورشید و منابع حرارتی نگهداری شود.

موارد هشدار

- در صورت تماس اتفاقی با چشم، اگر در چشمان خود لنز دارید ابتدا آن را خارج کنید و سپس با آب بهداشتی به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه شستشو داده و به پزشک مراجعه نمایید.
- در صورت بلع اتفاقی تحریک به استفراغ نگردد و فوراً به پزشک مراجعه شود
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

تاییدیه‌ها: دارای تاییدیه از معاونت غذا و دارو اراک

تاریخ انقضا: در حالت غلیظ و استفاده نشده ۳ سال



MyLife

کاربرد: محلول چربی بر کنسانتره قوی ویژه شستشو و پاکسازی سطوح از آلودگی‌های ارگانیک

دستور مصرف

برای پاکسازی عمومی سطوح مقدار ۱۰ تا ۲۰ میلی‌لیتر از محلول کنسانتره را در ۱ لیتر آب بهداشتی حل کرده و با آبفشان روی سطوح را آغشته کرده و با دستمال تمیز پاکسازی نمایید. یا محلول را روی دستمال تمیز اسپری نموده و سپس سطوح را دستمال کشی نمایید. برای شستشو سطوح بسیار کثیف مقدار ۵۰ تا ۱۰۰ میلی‌لیتر از محلول را در یک لیتر آب ترجیحاً گرم حل کرده و سطوح را آغشته کنید، چند دقیقه برای تاثیرگذاری زمان بدهید تا آلودگی‌ها نرم و سست شوند سپس سطح مورد نظر را تمیز کنید. پس از آن سطح مورد نظر را آبکشی یا با دستمال تمیز پاک نمایید.

بسته‌بندی‌ها:

۴ لیتر

۵۰۰ میلی‌لیتر

ترکیبات

- Sulfonic Acid
- Sodium Laureth Sulfate
- Diethanolamide
- Auxiliary Ingredients

مزایا



- سریع الاثر (موثر در ۳۰ ثانیه)
- بوی مطبوع و ملایم
- حاوی مواد نرم کننده پوست
- موثر بر روی طیف وسیعی از باکتری، قارچ، مخمر و ویروس‌ها
- سازگار با پوست، حتی پوست حساس کودکان و سالمندان

کاربرد: محلول ضد عفونی کننده الکلی جهت ضد عفونی بهداشتی دست در فضاهای عمومی
جامعه، مدارس، مهدکودک‌ها، مراکز تهیه و سرو غذا و نوشیدنی، صنایع و ...

شرایط نگهداری



در دمای بین ۵+ تا ۳۵+ درجه سانتی‌گراد،
دور از نور خورشید و منابع حرارتی نگهداری شود.

طیف اثر



باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی، قارچ‌ها، مخمرها،
مایکوباکتریوم‌ها، ویروس‌های پوشش‌دار و بدون پوشش.

تاییدیه‌ها



دارای تاییدیه و ثبت شده در اداره کل نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. دانشکده
داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تست شده مطابق استاندارد:

• ISIRI 10504 • ISIRI 19851 • ISIRI 16676



مای‌هَند
MY HAND



ترکیبات

- Ethanol
- Benzalkonium chloride
- Glycerin
- Auxiliary Ingredients




موارد هشدار

- محلول آتش‌زا می‌باشد، در ظروف در بسته نگهداری شود.
- از اسپری محلول بر روی شعله و منابع حرارت خودداری کنید.
- فقط برای استعمال خارجی و بر روی پوست سالم مصرف شود.
- از استنشاق و بلعیدن محلول خودداری شود.
- در صورت بلع اتفاقی تحریک به استفراغ نگردد و فوراً به پزشک مراجعه شود.
- در صورت تماس اتفاقی با چشم، اگر در چشمان خود لنز دارید ابتدا آن را خارج کنید و سپس با آب بهداشتی به مدت ۱۰ الی ۱۵ دقیقه شستشو داده و به پزشک مراجعه نمایید.
- از ورود آلودگی به ظرف جلوگیری شود.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

HP PHRASES:

P102-P210-P211-P403

H266-H242

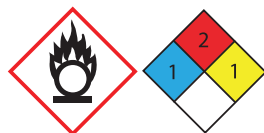

تاریخ انقضا:




دو سال پس از تولید
در صورت باز شدن درب محلول به مدت ۶ ماه



دستور مصرف

۲ تا ۳ میلی‌لیتر محلول را بر روی کف دست پمپ کرده و هر دو دست را بر روی یکدیگر مالش دهید به نحوی که بین انگشتان، پشت و روی دست تا مچ به محلول آغشته گردد. برای مدت ۳۰ ثانیه اجازه دهید که محلول در حین مالش از روی پوست خشک شود.

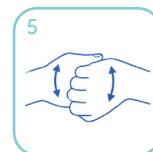

بسته‌بندی‌ها:

۱ لیتر همراه با پمپ	۱۰۰ میلی‌لیتر
	۲۵۰ میلی‌لیتر همراه با اسپری
۴ لیتر	۵۰۰ میلی‌لیتر همراه با پمپ

مزایا



- سریع الاثر (موثر در ۳۰ ثانیه)
- بوی مطبوع و ملایم
- حاوی مواد نرم کننده پوست
- موثر بر روی طیف وسیعی از باکتری، قارچ، مخمر و ویروس‌ها
- سازگار با پوست، حتی پوست حساس کودکان و سالمندان

کاربرد: ژل ضد عفونی کننده الکلی جهت ضد عفونی بهداشتی دست در فضاهای عمومی
جامعه، مدارس، مهدکودک ها، مراکز تهیه و سرو غذا و نوشیدنی، صنایع و ..

شرایط نگهداری



در دمای بین ۰+ تا ۳۵+ درجه سانتی‌گراد،
دور از نور خورشید و منابع حرارتی نگهداری شود.

طیف اثر



باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی، قارچ‌ها، مخمرها،
مایکوباکتریوم‌ها، ویروس‌های پوشش‌دار و بدون پوشش.

تاییدیه‌ها



دارای تاییدیه و ثبت شده در اداره کل نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. دانشکده
داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تست شده مطابق استاندارد:

• ISIRI 10504 • ISIRI 19851 • ISIRI 16676



مای‌ه‌ند ژل
MY HAND



ترکیبات

- Ethanol
- Glycerin
- Emollients
- Aloe Vera Extract
- Auxiliary Ingredients




موارد هشدار

- فرآورده آتش‌زا می‌باشد، در ظروف در بسته نگهداری شود.
- از ریزش فرآورده بر روی شعله و منابع حرارت خودداری کنید.
- فقط برای استعمال خارجی و بر روی پوست سالم مصرف شود.
- از استنشاق و بلعیدن محلول خودداری شود.
- در صورت بلع اتفاقی تحریک به استفراغ نگردد و فوراً به پزشک مراجعه شود.
- در صورت تماس اتفاقی با چشم، اگر در چشمان خود لنز دارید ابتدا آن را خارج کنید و سپس با آب بهداشتی به مدت ۱۰ الی ۱۵ دقیقه شستشو داده و به پزشک مراجعه نمایید.
- از ورود آلودگی به ظرف جلوگیری شود.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

HP PHRASES:

P102-P210-P211-P403

H266-H242

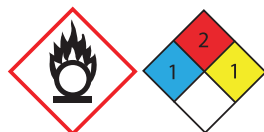

تاریخ انقضا:






دو سال پس از تولید
در صورت باز شدن درب محلول به مدت ۶ ماه



دستور مصرف

۲ تا ۳ میلی‌لیتر ژل را بر روی کف دست پمپ کرده و هر دو دست را بر روی یکدیگر مالش دهید به نحوی که بین انگشتان، پشت و روی دست تا مچ به ژل آغشته گردد. برای مدت ۳۰ ثانیه اجازه دهید که ژل در حین مالش از روی پوست خشک شود.

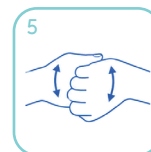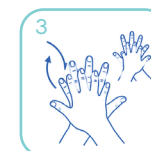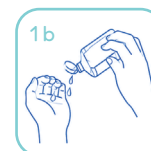

بسته‌بندی‌ها:

۱ لیتر همراه پمپ	۱۰۰ میلی‌لیتر
۴ لیتر	۵۰۰ میلی‌لیتر همراه با پمپ



ضد عفونی دست و پوست

نام محصول	کاربرد	نحوه مصرف	پایه شیمیایی	زمان اثربخشی	صفحه
درموسپت پلاس	اسکراپ جراحی و بهداشتی دست	حداقل ۲ دقیقه دست‌ها را ب‌شود	اتانول + ایزوپروپیل الکل	۲ دقیقه	۰۶
درموسپت	اسکراپ جراحی و بهداشتی دست	حداقل ۲ دقیقه دست‌ها را ب‌شود	اتانول	۲ دقیقه	۰۸
درموسپت ژل	ضد عفونی بهداشتی دست	تا ۳۰ ثانیه دست‌ها را ب‌شود	اتانول + ایزوپروپیل الکل	۳۰ ثانیه	۱۰
درموسپت آی‌ان‌جی	ضد عفونی محل تزریق	۳۰ ثانیه روی موضع مالش داده شود	اتانول و کلر هگزیدین	۳۰ ثانیه	۱۲
درموسپت سی‌اچ‌جی	اسکراپ جراحی و بهداشتی دست	حداقل ۲ دقیقه دست‌ها را ب‌شود	اتانول، ایزوپروپیل الکل، کلر هگزیدین	۲ دقیقه	۱۴
درموسپت پی	پرپ محل جراحی، CVC و کشت خون	حداقل ۶۰ ثانیه روی موضع مالش داده شود	اتانول، ایزوپروپیل الکل، کلر هگزیدین	۶۰ ثانیه	۱۶
درموسپت پی پلاس	پرپ محل جراحی، CVC و کشت خون	حداقل ۶۰ ثانیه روی موضع مالش داده شود	ایزوپروپیل الکل و کلر هگزیدین	۶۰ ثانیه	۱۸



پاکسازی دست و پوست

نام محصول	کاربرد	نحوه مصرف	پایه شیمیایی	زمان اثربخشی	صفحه
درموسپت بی‌دلیو	حمام و دکلونیزاسیون بیمار بستری در تخت	حمام بیمار در تخت / نیاز به آبکشی ندارد	اتانول + کلر هگزیدین	-	۲۲
درموسپت دلیو	شستشوی آنتی‌باکتریال بیمار قبل از جراحی، اسکراپ جراحی روش شستشو	مانند شامپو بدن ۳ تا ۵ دقیقه تنه و اندام‌ها شستشو شده سپس آبکشی شود	اتانول + کلر هگزیدین	۳ تا ۵ دقیقه	۲۴
درموکساید	پاکسازی و ضد عفونی‌کننده زخم و پوست	۷۰٪ رقیق شود	هیدروژن پراکساید	۶۰ ثانیه	۲۶

مراقبت دست و پوست




نام محصول	کاربرد	نحوه مصرف	پایه شیمیایی	زمان اثربخشی	صفحه
آکواسیلک	فوم پاک‌کننده و تمیزکننده ملایم پوست بدن	فوم ملایم پاکسازی روزانه بیماران بستری، کودکان و سالمندان، بدون نیاز به آبکشی	پاک‌کننده یونی	-	۲۹
مایع آکواسیلک	مایع دستشویی آکواسیلک کرمی	مایع دستشویی آکواسیلک کرمی ملایم برای حفظ رطوبت و چربی پوست	پاک‌کننده‌ها	-	۳۰
کرم آکواسیلک	لوسیون / مرطوب‌کننده	لوسیون نرم و مرطوب‌کننده و کاهش دهنده التهاب پوست ویژه پرسنل درمان	روغن بادام	-	۳۱

ضد عفونی سطوح



نام محصول	کاربرد	نحوه مصرف	پایه شیمیایی	زمان اثربخشی	صفحه
سارفوسپت کوئیک پلاس	ضد عفونی سریع‌الاث‌ر سطوح و ابزار	اسپری آماده به مصرف	اتانول + ایزوپروپیل الکل	۲ دقیقه	۳۴
سارفوسپت کوئیک	ضد عفونی سریع‌الاث‌ر سطوح و ابزار	اسپری آماده به مصرف	اتانول	۲ دقیقه	۳۶
سارفوسپت فوم	ضد عفونی سطوح و ابزار حساس به الکل	اسپری فوم آماده به مصرف	QAC	۲ تا ۳ دقیقه	۳۸
سارفوسپت ۱	شستشو و ضد عفونی همزمان سطوح محیطی	۱٪ رقیق شود (نیاز به آبکشی دارد)	QAC	۵ تا ۱۰ دقیقه	۴۰
سارفوسپت ۲	پاک‌کننده و ضد عفونی سطوح محیطی	۱٪ رقیق شود (نیاز به آبکشی ندارد)	QAC	۵ تا ۱۰ دقیقه	۴۲

ضد عفونی ابزار و تجهیزات

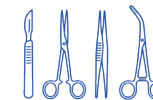

نام محصول	کاربرد	نحوه مصرف	پایه شیمیایی	زمان اثربخشی	صفحه
سارفوسپت اینسترومنت	پاک کننده و ضد عفونی ابزار سطح متوسط	۲٪ رقیق شود	QAC	۱۵ دقیقه	۴۶
سارفوکسان	ضد عفونی سطح بالای ابزار	آماده به مصرف	هیدروژن پراکساید	۱۵ تا ۳۰ دقیقه	۴۸
سارفوکسان اف	استفاده در دستگاه های مه پاش و مه خشک	آماده به مصرف	هیدروژن پراکساید	۱۵ دقیقه	۵۰
سارفوکسان ۳۰	ضد عفونی سطح بالای ابزار	کنسانتره	هیدروژن پراکساید	۱۵ تا ۳۰ دقیقه	۵۲
اکستات	ضد عفونی سطح بالای ابزار	کنسانتره	هیدروژن پراکساید	۱۵ تا ۳۰ دقیقه	۵۴
سارفوسپت اوپی ای	ضد عفونی کننده سطح بالای ابزار پزشکی و تجهیزات اسکوپ	آماده به مصرف	ارتوفتالددئید	۵ دقیقه	۵۶
سارفوسپت جی تی ای	ضد عفونی کننده سطح بالای ابزار پزشکی و تجهیزات اسکوپ	آماده به مصرف	گلوتارآلدئید	۲۰ دقیقه	۵۸

شوینده آنزیمی ابزار و تجهیزات



نام محصول	کاربرد	نحوه مصرف	پایه شیمیایی	زمان اثربخشی	صفحه
سارفوزایم	شوینده آنزیمی جهت شستشوی ابزار، تجهیزات و دستگاه های اسکوپ	کنسانتره ۵/۰٪ رقیق شود	مولتی آنزیم	۵ تا ۱۰ دقیقه	۶۲
سارفوزایم فوم	اسپری فوم آنزیمی، تمیز کردن ابزار تجهیزات دستگاه های اسکوپ، بلافاصله بعد از استفاده	آماده به مصرف	مولتی آنزیم	۵ تا ۱۰ دقیقه	۶۴

بهداشت عمومی



صفحه	زمان اثربخشی	پایه شیمیایی	نحوه مصرف	کاربرد	نام محصول
۶۷	–	شوینده آنیونی	۲٪ رقیق شود	شستشو و پاکسازی سطوح و ابزار	مای لایف
۶۸	۳۰ ثانیه	الکل	۲۰ تا ۳۰ ثانیه دست‌ها مالش داده شود.	ضد عفونی دست	مای هند
۷۰	۳۰ ثانیه	الکل	۲۰ تا ۳۰ ثانیه دست‌ها مالش داده شود.	ضد عفونی دست	مای هندزل

Thank you for your interest in **REZARAD**

Hand & Skin Disinfection • Hand & Skin Cleansing • Hand & Skin Care • Surface Disinfection • Instrument & Equipment Disinfection • Enzymatic Cleaner • General Hygiene

 rezarad_co
 021 - 54 891
 info@rezarad.com
 www.rezarad.com

تهران، خیابان گاندی، کوچه دهم، پلاک ۳
ساوه، شهر صنعتی کاوه، شرکت رضاراد 